

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Издание EJ 09.2022



VCTP0031 05-6

VCTP0031 05-K6

НАДСТРОЙКА ЗА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ

Съдържание:

1.	Въведение.....	2	6.	Безопасност на употребата.....	4
2.	Описание на продукта.....	3	7.	Експлоатация и поддръжка.....	5
3.	Показания	3	8.	Технически параметри.....	6
4.	Противопоказания.....	3	9.	Символи.....	7
5.	Употреба.....	3	10.	Данни за контакт.....	7

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИЯТА ПРЕДИ УПОТРЕБА

1. Въведение

Благодарим ви, че избрахте нашия продукт. Дълбоко сме убедени, че той ще отговори на вашите очаквания. Моля, прочетете този документ, преди да го използвате за първи път. Тези инструкции са предоставени, за да ви дадат необходимата информация за безопасна употреба. Правилното им спазване ще допринесе значително за дълготрайността и естетиката на продукта. Бихме искали да отбележим, че непрекъснато се стремим да подобряваме качеството на нашите продукти, което може да доведе до малки промени, които не са включени в инструкциите.

ВНИМАНИЕ!



Винаги спазвайте основните предпазни мерки съгласно информацията, дадена по-долу, по отношение на безопасността, когато използвате продукта. Прочетете внимателно цялото ръководство преди употреба. Съхранявайте това ръководство за бъдещи справки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Неправилната употреба може да доведе сериозни наранявания или неправилно функциониране на продукта.



ПРЕПОРЪКИ!

Следвайте инструкциите по-долу, за да поддържате продукта в добро работно състояние.

Ако продуктът се използва от друго лице, трябва да му предоставите копия от тази инструкция за употреба.

Настоящата инструкция за употреба се отнася до конструкцията и спецификациите на продукта към момента на публикуването им. Поради промени в дизайна някои илюстрации и снимки в ръководството може да не съответстват на закупения от вас продукт. Ние си запазваме правото да правим промени в дизайна.

Производителят не носи никаква отговорност за телесни повреди или материални щети, които могат да възникнат в резултат на неправилна или опасна употреба на този продукт.

2. Описание на продукта

Надстройките с фиксиране към тоалетната чиния са леки, лесни за почистване, устойчиви на вода, изработени от полиуретанов материал с топла контактна повърхност. Седалките имат винтове за закрепване към тоалетната чиния и гумени подложки, които осигуряват стабилност.

3. Показания

Улесняващо помощно оборудване, даващо възможност на хората с увреждания и възрастните хора да използват тоалетната. Помага за справянето с ежедневните физиологични нужди на хора с намалена подвижност, които изпитват затруднения при ставане, сядане, навеждане и изпитват болка при опит да заемат различни позиции. Идеален за болници и домашни грижи.

4. Противопоказания



Противопоказания за седнало положение, липса на стабилизация на тялото. Пациентите с нарушения на координацията, равновесието и интелектуални затруднения не трябва да бъдат оставяни без надзор.

5. Употреба

Продуктът се поставя директно върху тоалетната седалка и се закрепва чрез затягане на двата странични винта в задната част на продукта. Всеки път, когато използвате продукта, го почиствайте с влажна кърпа, като използвате мек почистващ препарат.

- След като разпакувате, проверете дали тя съдържа всички части в съответствие със списъка на елементите, посочен по-горе.
- Уверете се, че всички компоненти нямат видими повреди. Ако имате някакви съмнения, моля, свържете се с производителя.
- Не използвайте надстройката, докато всички части не бъдат правилно свързани.
- Всеки път проверявайте дали надстройката е правилно и сигурно монтирана на мястото си, преди да я използвате.

МОНТИРАНЕ



6. Безопасност на употребата



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Всеки "сериозен инцидент", свързан с изделието, трябва да се докладва на производителя или търговеца.



ВНИМАНИЕ!

Продуктът е предназначен за използване от хора с увреждания и двигателни нарушения. Ако не сте сигурни дали здравословното ви състояние позволява да използвате продукта, консултирайте се с медицински специалист.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не модифицирайте продукта по какъвто и да е начин - това ще доведе до прекратяване на гаранцията.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Преди да започнете да използвате, прегледайте това ръководство и го запазете за бъдещи справки.

- Помнете, че престояването в едно положение за продължително време може да доведе до раздразнения и кожни нарушения.

7. Експлоатация и поддръжка

- Надстройката трябва да се почиства с влажна кърпа.
- За да може продуктът да запази правилните си характеристики, е необходимо и изключително важно да се поддържат всички негови елементи чисти по всяко време. Липсата на грижи в това отношение ще доведе до бърза загуба на първоначалните полезни и естетически свойства.
- Не излагайте на екстремни метеорологични условия (дъжд, сняг, много силно слънце), защото някои части могат да променят цвета си.

Не е позволено да се използват:

- разтворители
- тоалетни препарати
- остри четки и твърди предмети
- почистващи препарати, които съдържат хлор
- корозивни детергенти

Не почиствайте с агрегати под налягане или пара!

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Ако продуктът се използва от няколко души (напр. в старчески дом), трябва да се използват налични в търговската мрежа дезинфектанти. Преди дезинфекция почистете добре. За дезинфекция могат да се използват само тествани и одобрени дезинфектанти. Информация за признати и одобрени дезинфектанти и методи за дезинфекция можете да получите от националния здравен орган.

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

Проверката трябва да се извършва редовно и да бъде предшествана от цялостно почистване (за да се открият всички скрити повреди) по време на техническата проверка:

Честота	Предмет на проверката	Коментари
Преди първата употреба	Проверка на техническото състояние на всички компоненти на продукта.	Проверете дали някой от елементите има видими механични повреди.
На всеки две седмици	Монтажни винтове гарантиране на тяхната изправност.	Уверете се, че винтовете са добре затегнати.
На всеки два месеца	Чистота, общо състояние.	В случай, че възникват механични повреди трябва незабавно да се свържете с търговеца/сервиза.

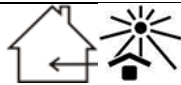
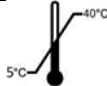
РЕМОНТ

Ако е необходим ремонт, свържете се с търговеца.

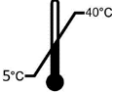
ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Ако имате въпроси или нужда от помощ, свържете се с търговеца.

8. Технически параметри

Височина	150 mm
Ширина	350 mm
Дължина	3900 mm
Размер на отвора	220 - 290 mm
Тегло	2,2 kg
Период на употреба	5 години след закупуване
Материали	полиулетан, гума
Описание на средата, в която ще се използва продуктът	
Температура на съхранение и употреба	
Максимално тегло на пациента	 100 kg

9. Символи

 Потвърждение за съответствие със стандартите на ЕС	 Допустимо тегло на потребителя	 Производител
 Защита от светлина	 Използване на закрито	 Дата на производство
 Прочетете инструкцията преди употреба	 Не стъпвайте върху стола	 Предупреждение
 Възможност за заклещване на пръстите	 Продуктът е предназначен за транспортиране с автомобил	 Температура на съхранение и употреба 5°C - 40°C
 Медицинско устройство	 Каталожен номер	 Уникален идентификатор на устройството

10. Данни за контакт

Бургос Медикъл ЕООД
 гр. Бургас
 бул. „Ст. Стамболов“ №73 УМБАЛ-Бургас
 тел: 0888 902526 email:kimryanov@burgosmed.com

