



ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Издание EJ 07.2025



АКУМУЛАТОРНА КОЛИЧКА

EASY GO

Съдържание:

1. Въведение.....	2	6. Безопасност на употребата.....	7
2. Описание на продукта.....	3	7. Експлоатация и поддръжка.....	10
3. Показания	4	8. Технически параметри.....	38
4. Противопоказания.....	4	9. Символи.....	39
5. Употреба.....	4	10. Данни за контакт.....	39

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИЯТА ПРЕДИ УПОТРЕБА

1. Въведение

Благодарим ви, че избрахте нашия продукт. Дълбоко сме убедени, че той ще отговори на вашите очаквания. Моля, прочетете този документ преди първата употреба. Това ръководство е създадено с цел да предостави необходимата информация за безопасното използване на устройството. Правилното прилагане на препоръките ще допринесе значително за удължаване на трайността и естетиката на продукта. Искаме да подчертаем, че постоянно се опитваме да подобряваме качеството на нашите продукти, което може да доведе до незначителни промени, които не са включени в ръководството. Тази инструкция се отнася до дизайна и спецификациите на продукта към момента на публикуването им. Поради промени в дизайна някои илюстрации и снимки в ръководството може да не съответстват на закупената от вас инвалидна количка.

Инвалидната количка е проектирана в съответствие с най-новите тенденции и технологии. Конструкцията ѝ позволява оптимално адаптиране към нуждите на потребителя. Солидна и издръжлива конструкция, иновативни решения и надеждна системи за безопасност гарантират максимален комфорт при използване. Неспазването на инструкциите може да доведе до повреда или до сериозни наранявания.

Ако електрическата инвалидна количка се използва от друго лице, трябва да му предоставите копия от тези инструкции за употреба.

Производителят не носи никаква отговорност за телесни повреди или материални щети, които могат да възникнат в резултат на неправилна или опасна употреба на този продукт. По време на транспорта батериите са

изключени, за да се гарантира дългият им живот. Свържете червения кабел с входа, маркиран с "+", преди да използвате инвалидната количка за първи път.

2. Описание на продукта

Електрическата инвалидна количка **EASY GO** е създадена за хора със сериозни двигателни увреждания.

Количката се управлява с джойстик или друго устройство за управление, което служи за контролиране на посоката на движение. Това е решение за хора, които не могат да използват обикновена инвалидна количка. Контролера осигурява отлична маневреност, като може да се върти около собствената си ос.



Фиг. 1

ОПИСАНИЕ			
1	Облегалка	7	Подлакътник
2	Контролер/джойстик	8	Седалка с възглавница
3	Предни светлини	9	Батерия
4	Колан за безопасност	10	Кошница
5	Задна гума	11	Предна гума
6	Дръжка	12	Степенки

Инвалидната количка е оборудвана с комплект ключове и упътване за употреба.

3. Показания

Електрическата инвалидна количка е устройство предназначено за хора с увреждания за осигуряване на качество на живот, страдащи от заболявания на опорно-двигателния апарат, гарантиращо по-голяма мобилност.

4. Противопоказания



Не е подходяща за пациенти с наранявания или дисфункция на горните крайници, невъзможност да заемат седанало положение, нарушена координация и възприятие.

5. Употреба



СЪВЕТ!

За да се удължи експлоатационният срок на акумулаторите, по време на транспортиране те ще бъдат изключени.




Не забравяйте да свържете червения кабел с входа, маркиран със символа „+“, преди да използвате инвалидната количка за първи път.

Избягвайте пълното разреждане на акумулаторите. Зареждайте акумулатора след целодневна употреба и поне веднъж на всеки 2 седмици.

Продуктът е опакован в сгънато положение.

- След като разопаковате, проверете дали опаковката съдържа всички части.
- Уверете се, че всички компоненти нямат видими повреди. Ако имате някакви съмнения, моля, свържете се с производителя.
- Не използвайте инвалидната количка, докато всички части не бъдат правилно свързани.

- Преди да управлявате инвалидната количка всеки път, трябва да намерите открито място, например парк, където да тествате маневри.
- Препоръчваме ви, при теста, да бъдете придружавани от асистент.
- Винаги се уверявайте, че инвалидната количка е изключена, преди да се качите или слезете.
- Винаги проверявайте дали настройката на скоростта е избрана в съответствие с вашия опит и умения.
- По време на тренировките поддържайте скоростта в най-бавното положение.
- За да управлявате безопасно, уверете се, че сте запознати с характеристиките на колчакат и начините на управление.
- Неспазването на инструкциите може да доведе до повреда на автомобила или до сериозни наранявания.

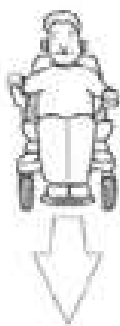

Първо, упражнявайте движение напред.

Уверете се, че скоростта е настроена на най-бавното положение.



След това се упражнете в "S" завои.



Накрая тествайте движение назад.

Моля, обърнете внимание, че при движение назад количката винаги се движи по-бавно, независимо от настройката на скоростта.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТКРИТО

- Инвалидната количка не е проектирана да се движи в уличното движение.
- Не използвайте инвалидната количка по време на дъжд или сняг, когато температурата е по-висока от 30° или по-ниска от 0°

- Не използвайте инвалидната количка върху меки, неравни, незащитени повърхности като трева, чакъл, пясък или настилки, край река, езеро
- Не използвайте инвалидните колички за движение извън пътя
- Ако е възможно, не използвайте инвалидната количка на открито през нощта
- Уверете се, че зад Вас няма препятствия, когато шофирате назад. Ние също така поръчваме да настроите скоростта на най-бавното положение
- Не спирайте внезапно, винаги се опитвайте да правите завои плавно
- По време на шофиране винаги дръжте ръцете си на подлакътниците, а краката - на поставката за крака
- Не се опитвайте да изкачвате бордюри, по-високи от 7 см
- Не се опитвайте да шофирате през дупка/пролука, по-широка от 10 см
- Не превозвайте пътници
- Не шофирайте след употреба на алкохол
- Консултирайте се с Вашия лекар, за да проверите дали лекарствата Ви не влошават способностите Ви за шофиране
- Не използвайте никакви лични комуникационни устройства, като радиостанции, мобилни телефони
- Не теглете ремарке

УПРАВЛЕНИЕ ПО ХЪЛМОВЕ И НЕРАВНИ ТЕРЕНИ

Управлението по хълмове и други неравни терени е по-опасно, отколкото шофирането по равни повърхности. Спазването на посочените по-долу правила е от съществено значение, за да се избегнат инциденти и сериозни наранявания.

- Не се опитвайте да изкачвате хълм, чийто наклон надвишава 10°.
- Не се движете назад, докато се изкачвате/слизате по хълм
- Не използвайте инвалидната количка върху меки, неравни, незащитени повърхности, като трева, чакъл или пясък
- Когато се движите по склон, изберете най-ниската скорост
- Не се качвайте и не слизайте от инвалидната количка, ако тя остане на склона (за да се качите/слизете от количката трябва да я поставите върху равна повърхност).
- Винаги се изкачвайте или спускайте по хълмове перпендикулярно на наклона

6. Безопасност на употребата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Всеки „сериозен инцидент“, възникнал във връзка с устройството, трябва да бъде съобщен на производителя и на компетентния орган на държавата-членка, в която живее потребителят.

ВНИМАНИЕ!



Продуктът е предназначен за хора с увреждания, страдащи от заболявания на опорно-двигателния апарат, с цел подобряване на тяхната мобилност. Ако не сте сигурни дали здравословното ви състояние ви позволява да използвате устройството, консултирайте се с медицински специалист.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Не променяйте продукта по никакъв начин; това ще доведе до анулиране на гаранцията.



Превишаването на максималното тегло на потребителя ще доведе до анулиране на гаранцията. Производителят не носи отговорност за наранявания и щети, ако максималното тегло на потребителя бъде превишено. Моля, прочетете тези инструкции за употреба, преди да използвате инвалидната количка, и ги съхранете за бъдеща справка.

- a) Преди да използвате инвалидната количка, прегледайте това ръководство и го запазете за бъдещи справки.
- b) Забранено е да използвате този продукт и наличното допълнително оборудване, без предварително да сте прочели и разбрали внимателно това ръководство.
- c) Ако не разбирате предупрежденията, забележките или инструкциите, свържете се с вашия доставчик, в противен случай може да се стигне до телесни повреди или злополука.
- d) Никога не се опитвайте да използвате електрическата инвалидна количка извън нейните ограничения, описани в това ръководство.
- e) Никога не деактивирайте контролния панел по време на шофиране, тъй като това ще накара инвалидната количка да спре внезапно, а това може да доведе до нараняване.
- f) Консултирайте се с Вашия лекар и попитайте дали лекарствата, които приемате, не оказват влияние върху способността Ви да управлявате механични превозни средства.
- g) Използването на изделието върху заледени, мокри, мазни, силно пясъчливи повърхности е недопустимо - създава риск от падане.

- h) Инвалидната количка трябва да се използва върху равни повърхности с наклон, по-малък от 5%.
- i) Инвалидната количка може да се използва само върху повърхности, където четирите колела докосват земята.
- j) Преди всяка употреба на този продукт:
 - Извършете визуална проверка на всички структурни компоненти на продукта,
 - Внимателно проверете стабилността и състоянието на опорната рамка.
 - Проверете работата на спирачната система.
- k) Не използвайте инвалидната количка в случай на видими или забележими повреди (напр. пукнатини по рамката). Това може да доведе до злополука.
- l) Инвалидната количка е предназначен за потребители с максимално тегло 120 kg.
- m) Инвалидната количка е проектирана да поддържа един човек.
- n) Не оставяйте инвалидната количка в близост до открити източници на огън.
- o) Имайте предвид, че температурата на повърхността на тапицерията и частите на рамката може да се повиши след излагане на слънце или друг източник на топлина. Освен това при ниски температури има опасност от преохлаждане на металните части и батериите. Това може да доведе до изгаряния или измръзване на части от тялото.
- p) Ако индикаторът за нивото на батерията падне до червено, заредете инвалидната количка възможно най-скоро. Пълното разреждане на батериите може да ги повреди или да съкрати живота им.
- q) Дръжте метални предмети далеч от връзките на батериите. Риск от електрически удар.
- r) При завиване винаги намалявайте скоростта и поддържайте центъра на тежестта стабилен. Винаги намалявайте скоростта при преодоляване на остри завои.
- s) Забранено е деца да играят в близост до електрическата инвалидна количка или да я управляват.
- t) Недопустимо е да използвате инвалидната количка след откриване на видими или откриваеми повреди (напр. счупена рамка), тъй като това може да доведе до злополука.
- u) Всички ремонти трябва да се извършват от квалифициран персонал.
- v) Преди употреба се уверете, че всички винтове са затегнати.
- w) Производителят не препоръчва самостоятелно извършване на каквито и да било модификации на инвалидната количка. Това може да доведе до падане или сериозни наранявания. Производителят няма да поеме отговорност за такива действия.

- x) Не превозвайте пътници.
- y) Не управлявайте след употреба на алкохол
- z) Не използвайте никакви лични комуникационни устройства, като радиостанции, мобилни телефони докато управлявате инвалидната количка.
- aa) Не теглете ремарке
- bb) Съхранявайте в чисти и сухи условия.
- cc) Забранено е да се движите през нощта без подходящо осветление.
- dd) Не сваляйте колелата против преобръщане или транспортните колела.
- ee) Дръжте ръцете и краката си далеч от движещите се части, когато шофирате. Внимавайте свободни дрехи да не се закачат за задвижващите колела.
- ff) Не свързвайте зарядното устройство на акумулатора към удължител.
- gg) Разглобяването на контролера, двигателя или зарядното устройство от лица, различни от оторизиран сервиз, е забранено и води до отпадане на приложимите гаранционни условия.
- hh) Забранено е управлението на инвалидната количка по обществени пътища и магистрали.
- ii) Бъдете внимателни, когато шофирате в оживени райони и търговски центрове.
- jj) В никакъв случай не трябва да използвате инвалидната количка като седалка, когато се транспортира с моторни превозни средства.
- kk) Не се опитвайте да вдигате инвалидната количка, като се хващате за нещо друго освен за рамката (например седалката, подлакътника или компонентите на шасито).
- ll) Не карайте инвалидната количка върху издигнати предмети (стъпала, бордюри), по-високи от 50 мм.
- mm) Инвалидната количка не е подходяща за изкачване или спускане по стълби. Винаги използвайте рампи или асансьори.
- nn) Инвалидната количка не е подходяща за преминаване през пролуки в настилната, по-широки от 100 мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Максималното тегло на потребителя е 120 kg

7. Експлоатация и поддръжка

ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ СМУЩЕНИЯ ЕМС

Проучванията на електромагнитните смущения показват, че те оказват неблагоприятно въздействие върху работата и управлението на мобилни устройства с електрическо захранване.

ЕМС може да идва от различни източници, като например мобилни телефони, радиостанции, телевизионни станции, радиолюбителски предаватели, безжични компютърни връзки и др. ЕМС вълните могат да причинят непреднамерено движение на инвалидната количка или повреда на контролера. Всяко мобилно устройство с електрическо захранване има определен имунитет към електромагнитни смущения. Колкото по-високо е нивото на устойчивост, толкова по-голяма е защитата. Интензитетът на смущенията може да се измери във волтове на метър (V/m). Съвременната технология позволява ниво на устойчивост от 20 V/m, което осигурява защита срещу най-често срещаните източници на електромагнитни смущения. Инвалидната количка, без каквито и да било модификации, има ниво на устойчивост 20 V/m. С приближаването към източника електромагнитните смущения стават по-интензивни. Специално внимание трябва да се обърне на електромагнитните смущения от ръчни радиоустройства. Възможно е неволно да доближите високо ниво на електромагнитни смущения до системата за управление на инвалидната количка, което може да повлияе на движението и спирането. За да предотвратите възможни смущения в системата за управление на инвалидната количка, спазвайте предупрежденията по-долу.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не използвайте ръчни радиопредаватели, като например СВ-радио или мобилен телефон, в близост до включена инвалидна количка.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Обърнете внимание и стойте настрана от намиращи се наблизо предаватели, като радио или телевизионни станции.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Движете електрическата инвалидна количка по права линия нагоре или надолу по склона, никога на заден ход. Неправилните движения напред и

назад с промени в наклона могат да увеличат риска от преобръщане на инвалидната количка.

ПРЕДИ УПОТРЕБА

Проверете да ли батериите са напълно заредени. Вижте раздел "Батерии и зареждане".

Проверете дали лостът на съединителя за ръчно изключване на задвижването е в положение за режим на задно задвижване. Никога не оставяйте лоста в положение за странично движение, ако не възнамерявате да бутате инвалидната количка ръчно.

Винаги планирайте маршрута си, като се уверите, че ще пропуснете опасни участъци (заблатени, трудни места) и препятствия, които няма да можете да преодолеете с инвалидна количка.

Проверете дали седалката е регулирана правилно.

Проверете дали скоростта е съобразена с вашите умения и възможности.

Проверете дали клаксонът функционира правилно.



ВНИМАНИЕ!

- Когато седите на количката, не опирайте тежестта на тялото си върху подлакътниците, тъй като това може да доведе до наранявания и количката да падне.
- Не се изправяйте върху степенките, тъй като инвалидната количка може да се преобърне.
- Не забравяйте да проверявате дали инвалидната количка е деактивирана, тъй като при невнимателно докосване на контролния превключвател при смяна на местата инвалидната количка може да се задвижи, а това може да доведе до падане и лични наранявания.
- По време на преместването се опитайте да останете възможно най-близо до инвалидната количка, за да избегнете подхлъзване и падане.

ИЗГЛЕД ОТЗАД



Фиг. 2

ОПИСАНИЕ			
1	Джоб за дребни продукти	4	Съединител
2	Бутон за сгъване на количката	5	Колела притив обръщане
3	Двигател	9	Амортисьор

ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

Електронният контролен панел позволява да се контролира захранването на количката, състоянието на батерията и общото състояние на цялата електронна система. Той се поставя на подлакътника и се свързва с батерията и двигателя. Може да бъде прикрепен към левия или десния подлакътник или зад инвалидната количка (когато тя се използва от болногледач).



1	Бутон за включване/изключване
2	Индикатор за ниво на батерии
3	Бутон за намаляне на скоростта
4	Клаксон
5	Бутон за увеличаване на скоростта
6	Индикатор за скоростта
7	Бутон за предна лед светлина
8	Джойстик
9	Гнездо за зареждане на батерията
10	Предна светлина

Фиг. 3

ИЗБОР НА СКОРОСТ

Има два бутона за регулиране на скоростта - ако искате да намалите скоростта, натиснете бутона за намаляване на скоростта. Действителната скорост се показва на индикатора, разположен между бутоните за регулиране на скоростта. Колкото по-бързо се движите, толкова повече светлини светват.

ИНДИКАТОРИ



Предни светлини:

За да включите предните светлини, натиснете бутона. Когато включите дългите светлини, съответната светлинна икона ще се активира. За да изключите предните светлини, натиснете бутона.

КЛАКСОН

Натиснете бутона за да активирате звуковия сигнал.

ДЖОЙСТИК

Джойстикът позволява да се контролират посоката и скоростта на движение. Натиснете джойстика напред, за да освободите електромагнитната спирачка и да приведете инвалидната количка в движение. Колкото повече натискате джойстика напред, толкова по-бързо ще се движи инвалидната количка. Ако освободите джойстика, инвалидната количка ще се забави и ще спре.

Преместването на джойстика назад от неутралното положение причинява движение на инвалидната количка назад. Преместването на джойстика настрани причинява завъртане на колелата наляво или надясно.

ВНИМАНИЕ!



Инвалидната количка е оборудвана с електромагнитни спирачки. Бъдете внимателни при управлението, тъй като ако джойстикът внезапно се върне в неутрално положение, инвалидната количка ще спре възможно най-бързо.



Обърнете специално внимание да не има части от дрехите или тялото ви, които да рискуват да се заклеят при спускане на седалката или накланяне на облегалката. Трябва да се проявява особена предпазливост.



Когато седището на инвалидната количка е повдигнато до максималната си височина, се препоръчва да не се използва (да не се прилага) максималната допустима скорост. Това може да доведе до загуба на стабилност и падане.

ГНЕЗДО ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

Гнездото се използва за зареждане на батерията - включете го към електрическия контакт (макс. 12 А).

ИНДИКАТОР ЗА ЗАРЯДА НА БАТЕРИИТЕ

Индикатора за състоянието на батерията се намира в горната част на контролера под бутона за стартиране. С помощта на цветните светлинни индикатори той предоставя информация за хранването, приблизителната ефективност на вашите батерии, електрическата система на инвалидната количка.

- Постоянната червена, жълта и зелена светлина показват, че батериите са напълно зарядени, електрическите системи и електронната система на контролния панел са ефективни.
- Постоянните червена и жълта светлина показват, че трябва да зарядите батериите, електрическите системи и електронната система на контролния панел са ефективни.
- Само постоянна червена светлина или бавно мигаща червена светлина - трябва да зарядите батериите веднага щом е възможно, електрическите системи и електронната система на таблото за управление са ефективни.
- Ако светлините мигат, електронната система или електрическата система не работят правилно. Ако предупредителната светлина мига 6 пъти, левият двигател е повреден. Ако предупредителната светлина мига 5 пъти - десният двигател. Изключете захранването, освободете джойстика и отново включете захранването.
- Ако предупредителните светлини мигат непрекъснато, джойстикът не е бил в неутрално положение, когато сте изключили инвалидната количка. Изключете захранването, освободете джойстика и отново включете захранването.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Ако сте спазили инструкциите в ръководството на потребителя, но предупредителните светлини все още светят/мигат, моля, свържете се с вашия дилър.

РАЗГЪВАНЕ НА ИНВАЛИДНАТА КОЛИЧКА

Сгънатата инвалидна количка може да се отключи, като се разкопчае ремъкът (Фигура 4.)



Фиг. 4

Ако контролният панел (джойстикът) е демонтиран, поставете го в профила под подлакътника и затегнете винта, както е показано на фигура 5.



Фиг. 5

Докато държите дръжката на облегалката, разгънете инвалидната количка до вертикално положение (фигура 6.). Спуснете и двата подлакътника и стипенката (фигура 7.)




Фиг. 6



Фиг. 7

Правилното разгъване на инвалидната количка се потвърждава от щракващия звук на заключващия механизъм, показан на фигура 8.

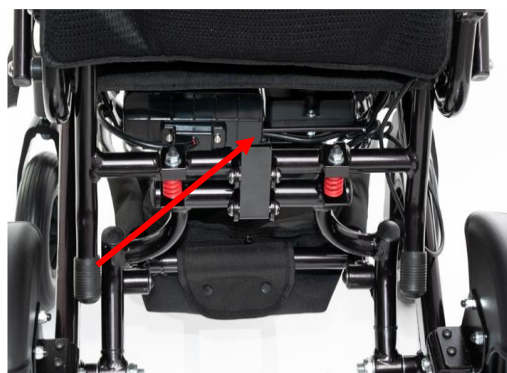

Фиг. 8

СГЪВАНЕ НА ИНВАЛИДНАТА КОЛИЧКА

- Сгъването се извършва в обратен ред спрямо разгъването, като се започва с натискане на бутона на заключващия механизъм за сгъване.
- Повдигнете подлакътниците и платформата за краката.
- След това сгънете инвалидната количка до положение, наподобяващо куфар.
- Инвалидната количка трябва да бъде закрепена с ремък (илюстрация 4) срещу случайно разгъване.

ВНИМАНИЕ!



При сгъването на инвалидната количка трябва да се проявява особено внимание, за да се гарантира, че нито дрехи, нито части от тялото не са изложени на риск от заклещване. Бъдете особено внимателни.

СЛИЗАНЕ ОТ ИНВАЛИДНАТА КОЛИЧКА

1. Спрете инвалидната количка напълно.
2. Изключете захранването от контролния панел
3. Внимателно и безопасно слезте от седалката

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Никога не се опитвайте да се качвате или слизате от инвалидната количка, без преди това да сте изключили захранването. Това предотвратява преместването на продукта, чрез случайно превключване на лоста за управление на задвижването.

МОНТАЖ И НАСТРОЙКА НА ПАНЕЛА УПРАВЛЕНИЕ (ДЖОЙСТИК):


- Развийте винта, който фиксира дръжката на панела за управление (илюстрация 9.).
- Поставете панела в правилната позиция.
- След това го фиксирайте, като затегнете винта.
- Смяна на страната на панела за управление - Свържете се с дистрибутора.



Фиг. 9

ОПЦИЯ – ЗАДЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ ЗА ПРИДРУЖИТЕЛЯ


Електрическият контролер за сервоуправление на задната част на инвалидната количка е интелигентна система за управление на задвижващия мотор. Контролерът осигурява надеждна, стабилна и ефективна схема за регулиране на скоростта. Интуитивният LCD дисплей улеснява управлението на инвалидната количка. Както при другите електронни продукти, правилната поддръжка и употреба могат да гарантират най-добрата надеждност на системата за управление.

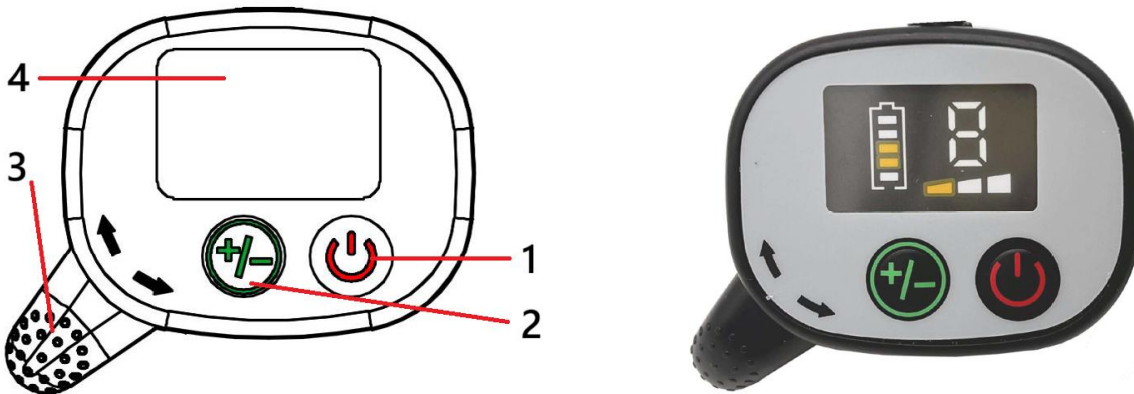

Фиг. 10

Задният контролер има следните функции:

1. Бутон за включване на захранването,
2. Регулиране на скоростта,
3. Избор на посоката на движение
4. Дисплей

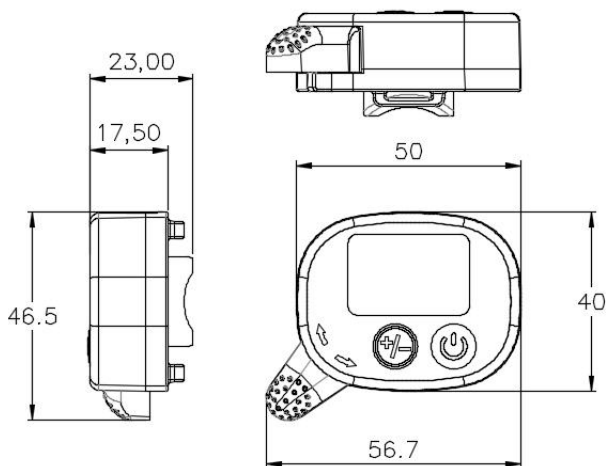

Фиг. 11 Размери на контролера в mm

- Включване/изключване на захранването и активността на контролера. Натискането на бутона активира контролера и включва екрана на дисплея. Повторното натискане на бутона изключва захранването и изключва екрана.

ВНИМАНИЕ!



Освен в случай на извънредна ситуация, не използвайте бутона за спиране, за да спрете инвалидната количка по време на движение – ако се използва редовно в такава ситуация, това може да съкрати експлоатационния срок на частите на инвалидната количка или да доведе до телесни наранявания.

- Бутон за увеличаване/намаляване на скоростта на инвалидната количка. Лицето, което се грижи за пациента, може да регулира скоростта според собствените си предпочитания или според условията по време на управлението на инвалидната количка. Скоростта е разделена на три нива,




които съответно представляват 20%, 40% и 60% от максималната скорост. Максималната скорост не трябва да надвишава 6 км/ч.

- Скоростта на предавка 1 е 20 % от максималната скорост (свети един от индикаторите за скорост).
- Предавка 2 е 40 % от максималната скорост (светят два индикатора за скорост).
- Предавка 3 е 60 % от максималната скорост (светят три индикатора за скорост).
- Натискането на бутона  увеличава скоростта. Бутонът работи в цикличен режим – след увеличаване на скоростта до предавка 3, при повторно натискане скоростта се връща към предавка 1.

- Дръжка/джойстик за избор на посока. Посоката на движение на джойстика може да управлява посоката на движение на електрическата инвалидна количка. Посоката и скоростта зависят от обхвата на движение на джойстика.

- Натискането на джойстика напред ще придвижи електрическата инвалидна количка напред.
- Натискането на джойстика назад ще го накара да се движи назад.
- Ако джойстикът не е натиснат, контролерът автоматично ще изключи захранването след времето, зададено от производителя, и ще премине в режим на заспиване. Натиснете бутона за включване, за да събудите контролера.

Фиг.12

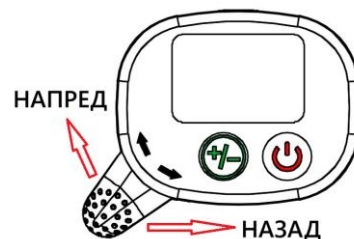

- LCD екран, показващ информация за настроените функции.

Всички части на контролера на електрическата инвалидна количка трябва редовно да се проверяват за разхлабване, повреди или неправилно свързване на клемите, конекторите и кабелите. Всички кабели трябва да бъдат защитени от повреда. Ако има повредени части, които трябва да бъдат подменени, се свържете с дистрибутора.

- Всички части на контролера не трябва да бъдат излагани на прах, мръсотия и течности. Избършете ги с кърпа, напоена с топла вода, ако е необходимо. Не използвайте почистващи средства на базата на разтворители или абразивни средства.
- Не се опитвайте да отваряте корпуса или да го ремонтирате сами, в противен случай гаранцията на продукта ще бъде анулирана. Ако имате въпроси, моля, свържете се с дистрибутора.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Потребителят носи отговорност за поддържането на всички компоненти в изправно състояние по всяко време. Продължителното излагане на пряка слънчева светлина или на химически разтворители, използвани в домакинството, може да повреди пластмасовите части, което да направи контролера неизползваем.

- Забранено е самостоятелното извършване на ремонт.
- Потребителят носи отговорност за поддържането на инвалидната количка в добро работно състояние и за осигуряването на максимална защита на всички части, включително кабелите, с цел предотвратяване на повреди.
- Когато инвалидната количка не се използва, изключете захранването на контролера.
- Ако контролерът не функционира правилно или проявява необичайни реакции, като прегряване, изпускане на дим и искрене на електрическите кабели, незабавно изключете захранващата система и се свържете с дистрибутора.
- В случай на неизправност, причинена от електромагнитни смущения, незабавно изключете захранването на контролера на инвалидната количка.
- Ако светодиодите на дисплея мигат по време на движение – това показва наличието на грешка; изключете захранващата система и се свържете с дистрибутора.

ОПЦИЯ – БЕЗЖИЧНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

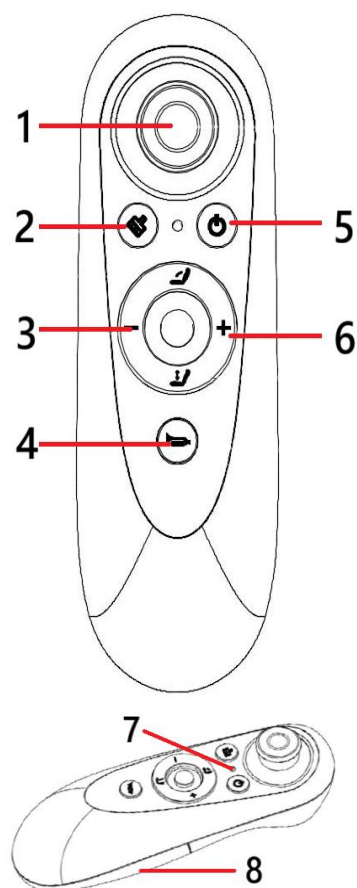

1	Джойстик. Управлява движението на инвалидната количка чрез завъртане в дадена посока.
2	Бутон за нулиране на връзката с контролера на инвалидната количка.
3	Бутон за намаляване на скоростта.
4	Клаксон
5	Включване/изключване на захранването и Активността на дистанционното управление. При натискане и задържане на бутона за 1 секунда се включва захранването на дистанционното управление. При повторно натискане и задържане на бутона захранването се изключва.
6	Бутон за увеличаване на скоростта
7	7 Светодиодна индикация. Информира за работата на функциите чрез светлинни индикации.
8	Капак на батерията.

Фиг. 13

Информационни LED сигнали.

Статус	Цвят и състояние на LED индикатора
Активиран	Червената и зелената светлина мигат последователно в продължение на 1 секунда.
Изключен	Червената светлина мига бързо в продължение на 1 секунда.
Свързване на дистанционното управление с инвалидната количка	Светлината мига непрекъснато, редувайки се между червено и зелено
Дистанционното управление е активно	Зелената светлина мига бавно.
Ниско ниво на батерията в дистанционното управление	Червената светлина мига бавно.

Безопасност при използване на дистанционното управление


- За да намалите риска от пожар и токов удар, не позволявайте дистанционното управление да се намокри или навлажни.
- Не използвайте дистанционното управление в близост до вода, не го потапяйте в никакви течности, не позволявайте течности да капят или да се разпръскват върху него.
- Не поставяйте и не използвайте дистанционното управление в близост до източници на топлина (като нагреватели, отоплителни уреди, пещи или други устройства, генериращи топлина).
- Не отваряйте и не сваляйте корпуса с цел поддръжка.
- Независимо от причината за повредата на дистанционното управление, то трябва да бъде ремонтирано от професионален сервизен персонал на производителя.
- Преди да избършете и почистите дистанционното управление със суха кърпа, изключете устройството и се уверете, че е изключено от контролера на инвалидната количка.
- Не използвайте химикали като силни киселини, алкали, бензин, алкохол и др. за избърсване на повърхността на дистанционното управление. Ако е необходимо почистване, използвайте неутрални разтворители или вода.
- Късовълновият радиосигнал, излъчван от безжичните продукти, може да пречи на нормалната работа на други електронни устройства. Моля, изключвайте дистанционното управление на места, където не е разрешено използването на този тип продукти.
- Не използвайте дистанционното управление на разстояние по-малко от 20 см от електронни пейсмейкъри или други медицински устройства, тъй като радиовълните могат да пречат на нормалната им работа.
- За да се гарантира безопасността и да се удължи експлоатационният живот на дистанционното управление, когато то не се използва продължително време или по време на буря, батерията трябва да се извади.

Използване на дистанционното управление

Уверете се, че безжичното дистанционно управление е включено (индикаторът за сигнал светва, когато устройството е включено).

- Изключете всички други контролери и включете само този, който ще се свързва. Това е необходимо, за да се предотврати смущаване от „Bluetooth“ сигнали, което може да повлияе на ефективността на връзката.

- Включете захранването на контролера на инвалидната количка, която ще свържете, и се уверете, че безжичното дистанционно управление е в активно състояние.

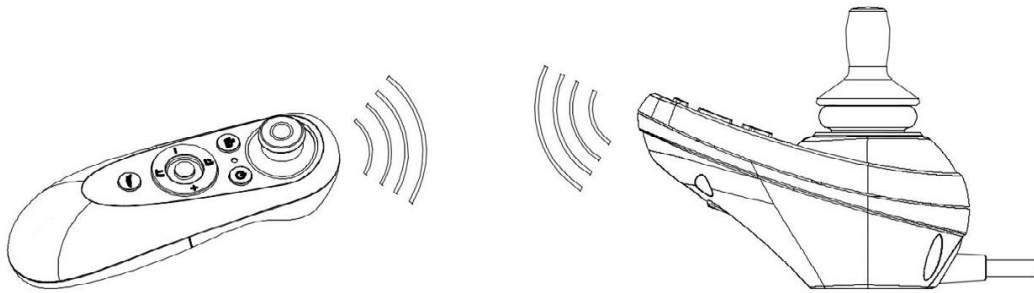

Фиг. 14

Процес на автоматично свързване на безжичното дистанционно управление:

- Уверете се, че контролерът на инвалидната количка, която ще се свързва, е включен, а останалите контролери са изключени от захранването.
- Натиснете и задръжте бутона за включване на безжичното дистанционно управление за около 1 секунда и го поставете в близост до контролера на инвалидната количка. През това време индикаторната лампа на безжичното дистанционно управление мига последователно в червено и зелено, което показва, че свързването е в ход. Контролерът на инвалидната количка ще издаде три къси сигнала, а статусът на скоростта ще се промени на 2-ра предавка, а индикаторът за състоянието на безжичното дистанционно управление ще мига бавно в зелено, за да покаже края на автоматичното свързване.
- След успешно свързване всички налични функции на инвалидната количка могат да се управляват дистанционно чрез дистанционното управление. Ако свързването се провали, можете да опитате отново и отново, докато успеете. В случай на неуспешно свързване се свържете с дистрибутора.
- За да проверите дали безжичното свързване е осъществено правилно:
 - Натиснете леко лоста (джойстика) на безжичното дистанционно управление, за да проверите дали инвалидната количка се движи.
 - Изключете и включете захранването на дистанционното управление и наблюдавайте дали контролерът в инвалидната количка показва, че връзката е успешна.
 - Използвайте бутоните „увеличаване на скоростта“ и „намаляване на скоростта“ на безжичното дистанционно управление, за да проверите дали индикаторът за скорост на контролера в инвалидната количка променя показаната стойност.

- Използвайте бутона „signal“ на безжичното дистанционно управление, за да проверите дали акустичният предупредителен сигнал на инвалидната количка работи правилно.


ВНИМАНИЕ!



За да се подобри безопасността и функционалността на дистанционното управление, ако то не се използва в продължение на 35 секунди, то ще се изключи автоматично. След включване на дистанционното управление, ако контролният панел в инвалидната количка не бъде разпознат, изчакайте 35 секунди, преди дистанционното управление да се изключи автоматично. Ако искате отново да управлявате инвалидната количка, включете контролния панел в инвалидната количка и след това дистанционното управление. За да се гарантира определено ниво на безопасност при употреба, когато използвате безжичен контролер за инвалидна количка, скоростта автоматично се настройва на най-високата скорост във втората предавка.


Изтриване на запаметена връзка (подготовка за нова връзка):

- Изключете безжичното дистанционно управление.
- Натиснете и задръжте едновременно бутони 2 и 5 за повече от 3 секунди, както е показано на фигура 15, и червената и зелената светлина на индикаторите ще засветят 3 пъти (ако контролерът на инвалидната количка е включен, връзката с дистанционното управление ще бъде автоматично прекъсната).
- След изтриването на връзката индикаторът за състоянието мига последователно в червено и зелено, което означава, че прекъсването на връзката е успешно завършено. Безжичното дистанционно управление вече няма да се свързва автоматично с контролера на инвалидната количка.
- Дълго натискане на бутона за включване ще деактивира дистанционното управление.
- Ако изтриването на връзката не успее, опитайте да повторите операцията няколко пъти. Ако повторените опити не доведат до желания резултат, свържете се с дистрибутора.

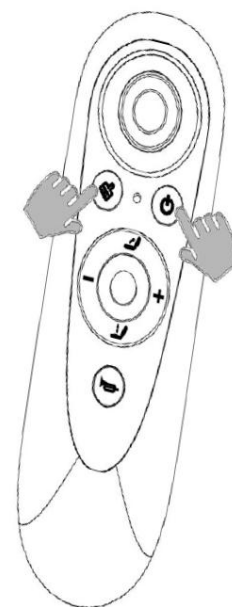


Фиг. 15


Поставяне на батериите в безжичното дистанционно управление.

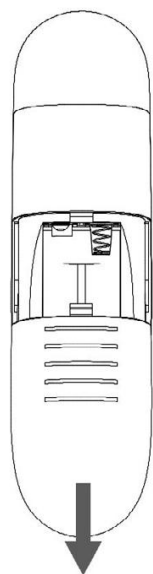

1. Хванете капака на батерията и го издърпайте надолу, за да го махнете.

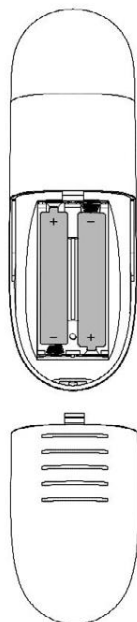

2. Поставете батерията в отделението за батерията (обърнете внимание на правилното посочване на положителния и отрицателния полюс на батерията).

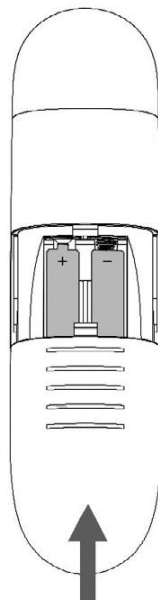

3. Поставете капака върху поставката за батерията и го плъзнете, за да се затвори напълно.

ПОДЛАКЪТНИЦИ

За да наклоните подлакътника, го повдигнете, както е показано на фигури 16 и 17.



Фиг. 16



Фиг. 17



ВНИМАНИЕ!

При сгъването на инвалидната количка трябва да се проявява особено внимание, за да се гарантира, че няма риск от заклещване на дрехи или части от тялото. Бъдете особено внимателни.

СЪЕДИНИТЕЛ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗАДВИЖВАНЕТО

Инвалидната количка има два лоста на съединителя, с които се включва или изключва електрическото задвижване и се осигурява възможност за ръчно бутане на количката.

- За да изключите задвижването с цел ръчно бутане, спуснете лоста колкото се може по-надолу – положение Б на фигура 18.
- Включването на задвижването (режим на движение) се извършва чрез повдигане на лоста нагоре - положение А.



Фиг. 18

ВНИМАНИЕ!

Не изключвайте електрическото задвижване, ако няма човек, който да управлява инвалидната количка.

Не изключвайте електрическото задвижване, когато инвалидната количка се намира на наклон, тъй като тя може да се придвижи и да създаде риск от нараняване.

Имайте предвид, че когато електрическото задвижване е изключено, електромагнитната спирачна система също е изключена.

Винаги стойте зад инвалидната количка, когато електрическото задвижване е изключено.

Забранено е да правите това, докато седите в инвалидната количка. След като преместите инвалидната количка на желаното място, не забравяйте да включите отново електрическото задвижване.



ПРЕДПАЗЕН КОЛАН

Коланът за таза служи за стабилизиране на седналото положение и предотвратява изпадането на ползвателя от електрическата инвалидна количка напред. За да закрепите колана, издърпайте двата края напред и затворете закопчалката (фигура 19.), така че да се чуе, че се е закрепила. За да отворите колана за таза, натиснете бутоните на катарамата и отворете краищата на колана.



Фиг. 19

ВНИМАНИЕ!




Не забравяйте да закопчавате предпазния колан преди всяко пътуване. Трябва да се внимава да няма предмети, заклещени под колана. По този начин ще избегнете болезнени точки на натиск. Дължината на колана за талията може да се регулира, като се внимава да не се дърпа прекалено силно.



Коланът не е част от системата за закрепване на електрическата инвалидна количка и/или нейния ползвател при превоз в моторно превозно средство.

КОЛЕЛА ПРОТИВ ПРЕОБРЪЩАНЕ

- За да настроите издърпването на колелата срещу преобръщане, стъгнете инвалидната количка и я разположете така, че да имате удобен достъп до регулиращите винтове, намиращи се под задните колела на количката.
- С помощта на 5-милиметров шестограмен ключ развийте двата винта (фигура 20), без да ги изваждате напълно, и регулирайте издърпването на колелата против преобръщане.
- След това затегнете винтовете и проверете дали релсата на колелата против преобръщане е здраво закрепена.

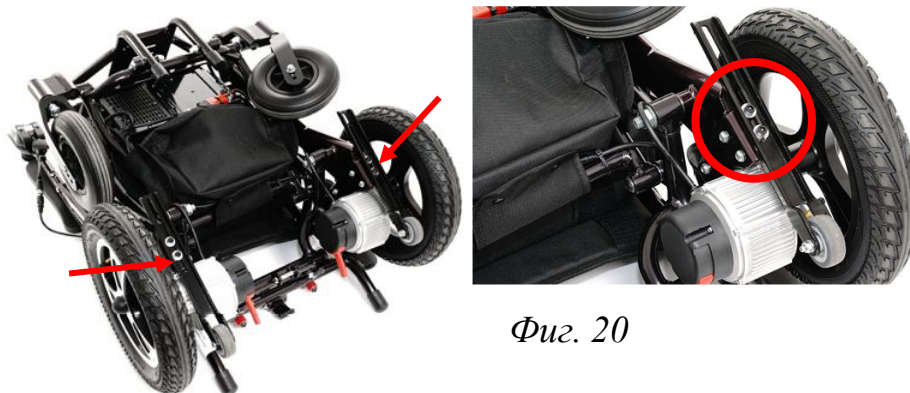

Фиг. 20

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ИНВАЛИДНАТА КОЛИЧКА

Инвалидната количка трябва да се превозва само с превозни средства, пригодени за тази цел.

Колелата трябва да бъдат блокирани. Забранено е да се намирате в инвалидната количка по време на превоза, тъй като това може да доведе до падане и сериозни наранявания. Винаги се уверявайте, че инвалидната количка е правилно закрепена в превозното средство, в противен случай това може да доведе до наранявания на хората, които се движат в това превозно средство, както и до сериозни повреди на самото превозно средство.

При каране по рампата в превозното средство трябва да се осигури защита отзад, за да се предпази инвалидната количка от преобръщане.

Всички допълнителни елементи на инвалидната количка трябва да бъдат премахнати от нея по време на транспортиране или закрепени към нея така, че да не причинят наранявания на хора или повреди на транспортното оборудване при внезапно спиране.

Когато вдигате сгънатата инвалидна количка, я дръжте за елементите на рамката – държача на облегалката и рамката на степенките.

Места за хващане по време на превоза се показани на фигура 21.



Фиг. 21

НАПОМПВАНЕ НА ГУМИ

Отвийте и махнете пластмасовата капачка от вентила и я оставете на сигурно място. Важно е да не я изгубите, защото вентилите ще се замърсят, което ще доведе до затруднения при напompването и по-бърза загуба на въздух.

- Поставете накрайника на помпата върху вентила и проверете дали се прилепва добре. Ако е необходимо, препоръчително е да притиснете помпата към вентила, за да не изтича въздух.
- Ако помпата има лост със скоба на накрайника, затегнете я. Ако накрайникът на помпата и вентилът имат резбовани краища, те трябва да бъдат завити един към друг. По този начин въздухът ще постъпва директно във вътрешната гума и накрайникът няма да се отдели от вентила.
- По време на напompването периодично проверявайте налягането в гумата.
- След като напompването приключи, махнете или отвийте накрайника от вентила, като натиснете изхода му с палеца си. Важно е да го направите достатъчно бързо, за да не излезе прекалено много въздух.
- Вавийте капачката обратно върху клапана.



Фиг. 22

ВНИМАНИЕ!



Спазвайте правилното налягане в гумите съгласно стойностите, посочени от производителя върху страничните стени на гумите.

Използвайте помпа с манометър или ръчна помпа за велосипед.

БАТЕРИИ И ЗАРЕЖДАНЕ

Инвалидната количка е оборудвана с батерии с дълъг експлоатационен живот. Батериите са надеждно закрепени и не изискват поддръжка.


- Използвайте стандартен 3-контактен заземен щепсел и заземен контакт.

- Не използвайте удължител или адаптери, за да избегнете риска от пожар, токов удар и нараняване.
- Не използвайте същия контакт за други дейности, докато зареждате батерията.
- Използвайте само зарядното устройство, което е фабрично предназначено за тази инвалидна количка, за да избегнете повреди.
- Не оставяйте зарядното устройство в контакта, ако батериите не се зареждат.
- Пазете зарядното устройство и батериите от вода и влага, не работете с него с мокри ръце.
- Зареждайте инвалидната количка в добре проветрено помещение.
- Не покривайте вентилатора на зарядното устройство, за да позволите разсейването на топлината.
- Преди да използвате инвалидната количка за първи път, изчакайте да премине пълен цикъл на зареждане с продължителност най-малко 12 часа.
- За да се поддържат оптималните експлоатационни характеристики на батерията, трябва да се извършат 5 цикъла на пълно зареждане по 12 часа.
- Оставете устройството в покой, докато батериите се заредят напълно.
- Не сядайте върху инвалидната количка, докато батериите се зареждат.
- Не спирайте да зареждате батериите, докато индикаторът за зареждане не покаже, че батериите са напълно заредени.
- Не поставяйте зарядното устройство директно върху батериите.
- Проверете дали параметрите на зарядното устройство съответстват на параметрите на батериите и на мрежовото напрежение. Свързването на батерия с различни параметри може да доведе до повреда на батерията и сериозно нараняване на потребителя.
- Особено по време на зареждане, избягвайте да излагате количката и зарядното устройство на високи температури и дим, за да избегнете запалване и експлозия.
- За да избегнете токов удар, е забранено да докосвате зарядното устройство или батерията с мокри ръце или други предмети, както и да избягвате излагането на влага.
- Проверете дали превключвателят на зарядното устройство е поставен в положение "О", преди да свържете зарядното устройство към електрическата мрежа и свързаните към него батерии.
- Не излагайте зарядното устройство на дъжд от вода и влага.
- Процесът на зареждане трябва да се извършва при температура на околната среда от 0°C до 40°C, при други условия зареждането може да се провали или да доведе до повреда на батериите.

- Ако индикаторът за процеса на зареждане не светне, изключете кабелите за 10 минути и опитайте да ги свържете отново след това време. Ако това не помогне, свържете се със сервиза.
- Свържете се със сервиз, ако индикаторът за зареждане остане жълт след зареждане за повече от 12 часа.

ПРОЦЕС НА ЗАРЕЖДАНЕ

1. Когато зареждате новите батерии за първи път, зареждането трябва да продължи, докато всички зелени контролни индикатори мигат, но не повече от 24 часа.
2. Паркирайте инвалидната количка възможно най-близо до заземяния контакт.
3. Изключете инвалидната количка.
4. Уверете се, че електрическото захранване на инвалидната количка е включено (съединителят е в правилно положение - режим на задвижване).
5. Включете зарядното устройство в гнездото за зареждане, поставено на контролния панел. Фиг.23
6. Свържете зарядното устройство към заземен контакт, като не забравяте да проверите дали контактът е с подходящо напрежение - 115V/230V.
7. Включете зарядното устройство.
8. Ако светодиодите мигат неравномерно, изключете зарядното устройство. Проверете връзката му и го включете отново.
9. В случай че процедурата по зареждане ще протече без усложнения, диодите, обозначаващи нивото на зареждане на батерията, ще светнат (както е описано по-горе).
10. Когато зареждането приключи, изключете зарядното устройство от контакта, след което извадете щепсела от контакта за зареждане.
11. Инвалидната количка няма да се движи по време на зареждането, дори ако джойстикът е натиснат.

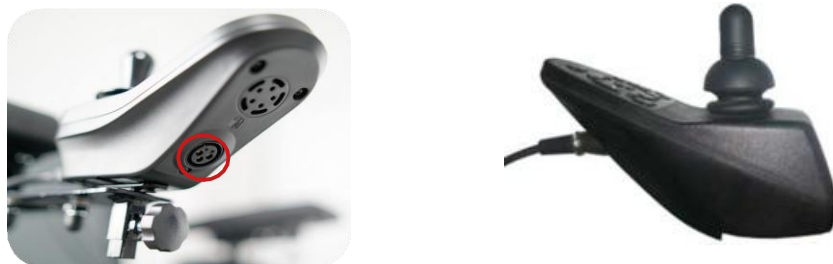

Фиг.23 Гнездо за зареждане

ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО

- Превключвател на захранването:

„-“ бутон за включване

„О“ бутон за изключване

За да включите зарядното устройство, натиснете бутона „-“, за да изключите бутон „О“.



- Индикатори за зареждане

оранжева светлина: зареждане в ход

жълта светлина: зареждането е завършено,
батериите са напълно заредени



Фиг. 24


БАТЕРИИ - СЪХРАНЕНИЕ

- В случай че инвалидната количка ще остане неизползвана за по-дълъг период от време, извадете батериите и ги съхранявайте на сухо и студено място.
- Избягвайте пълната повреда на батерията.
- Ако използвате инвалидната количка всеки ден, зареждайте батериите всеки ден.
- Ако използвате инвалидната количка веднъж седмично, зареждайте батериите веднъж седмично.
- Не е позволено частично зареждане на батериите (например свързване на батериите за по-кратко време от пълния цикъл на зареждане), тъй като това може да повреди батерията или да ограничи нейната издръжливост.
- Могат да се съхраняват само напълно заредени батерии.
- Ако не използвате редовно инвалидната си количка, за да поддържате издръжливостта на батериите, ги зареждайте поне веднъж на две седмици, като спазвате процеса на пълно зареждане.
- В случай, че батерията е повредена или трябва да бъде сменена, съобщете на вашия дистрибутор. Не изхвърляйте батерията в кофата за боклук, а я предайте на дистрибутора.
- За да предотвратите късо съединение и повреда на батерията, никога не докосвайте контактите на батерията с метални предмети.



СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ

Поставете акумулатора, като го плъзнете в отделението под седалката на инвалидната количка (Фигура 25.). Уверете се, че заключването е затворено (чува се щракване). Акумулаторът може да се зарежда извън инвалидната количка.

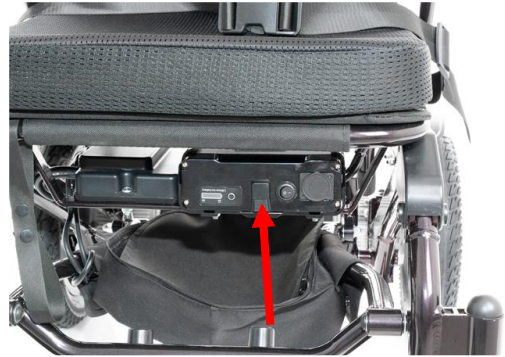

Фиг. 25

Извадете акумулатора и го заредете на място, защитено от влага, като свържете зарядното устройство към гнездото на акумулатора (фигура 26.)



Фиг. 26

ВНИМАНИЕ!

Ако батерията е била изложена на много ниски температури (замръзнала), не я зареждайте.



Ако батерията е била замразена, дръжте я на стайна температура за няколко дни, за да се загрее, и след това я заредете.

ПРЕПОРЪКА!

Ако не сте сигурни кога и как да смените батерията, свържете се с вашия сервизен център или дистрибутор.



БАТЕРИИ

Инвалидната количка е оборудвана с 12 V / 20 Ah батерия, които не се нуждае от поддръжка.

За да постигнете максимална ефективност на батерията, следвайте инструкциите по-долу:

- Заредете батерията преди първата употреба. Тя ще достигне 90 % от капацитета си.

- Използвайте инвалидната количка, като се движите бавно, недалеч от мястото, където можете да заредите батериите отново, докато батериите се разредят напълно. След това ги заредете отново в продължение на 9-10 часа.
- След четири или пет такива цикъла на зареждане батериите трябва да достигнат 100 % от капацитета си и да издържат дълго време.

КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ВНИМАНИЕ!



Ако има грешка в системата, когато тя е включена, индикаторът за състоянието ще мига в червено; броят на миганията ще показва вида на грешката.

Таблицата по-долу описва индикацията за грешка и няколко възможни действия, които могат да бъдат предприети за отстраняване на проблема. Изброените действия не са подредени в определен ред и са само предложения; целта е едно от предложенията да ви помогне да отстраните проблема. Ако се съмнявате, консултирайте се с вашият доставчик.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ако инвалидната количка спре, обърнете посоката или отстранете препятствията. Ако инвалидната количка е била преместена, докато захранването е изключено, включете и изключете захранването.

Грешка	Възможни действия
Светлините мигат бързо когато е включена	Изключете захранването Поставете джойстика в неутрално положение. Изчакайте няколко секунди и активирайте отново количката
Светлините на контролера мигат бавно по време на движение	Батериите трябва да се заредят възможно най-скоро.
Светлините на контролера мигат непрекъснато и не е възможно да се управлява инвалидната количка	Може да има електрически проблем. Изключете захранването и се обърнете към дистрибутора.
Червената лампа на контролера не свети по време на зареждане.	Проверете кабелите и връзките. Заменете захранващия модул. Ако червеният контролер все още не свети, изключете зарядното устройство, изключете

	инвалидната количка и се обърнете към оторизиран сервиз.
Инвалидната количка се управлява трудно.	Проверете кабелите и връзките. Проверете дали спирачка е освободена Проверете дали четирите колела са правилно монтирани на електрическата инвалидна количка. Проверете дали лостът на съединителя е задействан.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Ако инвалидната количка спре, обърнете посоката или отстранете препятствията. Ако инвалидната количка е била преместена, докато захранването е изключено, включете и изключете захранването.

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

Недостатъчните или изоставени грижи и поддръжка на електрическа инвалидна количка водят до ограничаване на отговорността на производителя.

За да се осигури дълготрайна и ефективна дейност на инвалидната количка, от съществено значение е извършването на основни дейности по поддръжката и прегледите, провеждани от сервизния отдел. Прегледите трябва да се извършват веднъж годишно. В случай на съмнения или повреди се обърнете към вашият дистрибутор, тъй като той разполага с всички необходими компетенции за решаване на вашия проблем.

- Почистете рамката на проходилката с влажна кърпа.
- Редовно отстранявайте замърсяванията
- За да се запазят параметрите на проходилката, е много важно всички елементи да се поддържат чисти и да се съхраняват правилно.
- Съхраняването на проходилката на влажни места (бани, перални и др.) или на открито, съчетано с липсата на хигиена, бързо ще влоши експлоатационните и естетическите характеристики.
- Не излагайте проходилката на екстремни метеорологични условия (дъжд, сняг, силно слънце), защото някои части могат да променят цвета си.

Не трябва да използвате:

- разтворители,
- тоалетни препарати,
- остри четки и твърди предмети,
- почистващи препарати, които съдържат хлор,

- агресивни почистващи препарати,

Не почиствайте проходилката с агрегати под налягане или пара!

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

- Прегледът трябва да се извършва редовно, като се предшества от щателно почистване на проходилката (за да се открият всички скрити повреди).

Честота	Обект на контрол	Коментари
Преди първата употреба	Проверка на техническото състояние и всички елементи в рамките на опаковката.	Проверете дали някои елементи имат видими механични повреди.
	Магнитно управление на спирачките. Настройте лоста за превключване на режима на шофиране от двете страни в режим на шофиране.	Извършете проверката самостоятелно или с помощно лице. Ако инвалидната количка може да бъде бутана, незабавно се обърнете към сервизния център за ремонт на спирачките. - Риск от злополука!
Особено преди шофиране след осветление.	Проверете за правилното функциониране на светлини и рефлектор.	Извършете проверката самостоятелно или с помощно лице.
На всеки две седмици	Контрол на винтове, гайки и нитове относно правилното им закрепване.	Уверете се, че всички винтове и нитовете са фиксирани здраво.
	Проверка на налягането в гумите: 2,5 bar = 36 psi	Извършете проверката сами или с помощно лице. Използвайте манометър.
На всеки 6-8 седмици	Закрепване на болтовете. Проверете гайките и болтовете за правилно закрепване.	Извършвайте тези дейности самостоятелно или с помощта на друго лице. Затегнете здраво болтовете на гайките на колелата и ги затегнете отново след 10 часа или 50 км. Ако е необходимо, се обърнете към сервиза.
На всеки два месеца	Чистота и общо състояние.	В случай на механична повреда незабавно се

		свържете с производителя.
	Контрол на профила на гумата Минимална дълбочина на протектора на гумата = 1 мм	Извършете проверката сами или с помощта на друго лице. В случай на износена профил или повредени гуми, възложете ремонта на специализиран сервиз.
На всеки 6 месеца (в зависимост от продължителността на пътуването)	Проверете - Чистота - Общо състояние	Извършете проверката сами или с помощта на друго лице. е ремонтът да се извърши от специализиран сервиз.
Препоръки на производителя: На всеки 12 месеца	Проверка на работата - Превозно средство - Товарач	Извършва специализирана услуга.

ГОДИШНА ПРОВЕРКА

Проверката трябва да се извърши в сервизен център. Целта на проверката е да се потвърди, че инвалидната количка работи правилно, че всички нейни системи (електрическа, електронна, задвижваща) са напълно изправни. Тя също така помага да се предотвратят възможни усложнения, произтичащи от повреда на някоя от гореспоменатите системи.

ПРЕГЛЕДЪТ ТРЯБВА ДА ВКЛЮЧВА

1. Проверка на гумите.
2. Проверка на акумулаторите и техните връзки.
3. Проверка на работата на контролния панел (електронната система).
4. Проверка на рамката.
5. Проверка на състоянието на тапицерията.

СЪХРАНЕНИЕ

Електрическата инвалидна количка трябва да се съхранява на сухо място, защитено от екстремни температури. Винаги изваждайте батериите, когато инвалидната количка се съхранява. Не забравяйте, че както повечето електрически съоръжения, вашата електрическа инвалидна количка е податлива на повреди. Избягвайте всякакъв вид влажна среда. Ако съхранявате инвалидната количка на неподходящи места, рамката може лесно да ръждяса а електрониката и електронните компоненти могат да се повредят.

РЕМОНТ


В случай на ремонт, моля, свържете се с търговеца.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Ако имате въпроси или нужда от помощ, свържете се с търговеца.


8. Технически параметри

Модел		EASY GO
Допустимо тегло на потребителя		 120 kg
Дълготрайност на продукта		8 години от датата на закупуване
Височина		960 mm
Ширина		600 mm
Дължина		980 mm
Ширина сгъната		450 mm
Седалка	Ширина	430 mm
	Височина от земята	500 mm
	Дълбочина	420 mm
	Възглавница	50 mm
Облегалка	Височина	500 mm
	Ширина	430 mm
Височина на подлакътника от земята		720 mm
Тегло	Без батерии	25 kg
	С батерии	30,9 kg
Колела	Предни	200 x 50 mm 8" бандажни
	Задни	320 x 60 mm 12" пневматични
	Налягане	Изписано е върху гумата
Максимална скорост на движение		напред 6 km/h
		назад 2,5 km/h
Пробег		до 20 km
Двигател		2 x 250 W /24V/
Зарядно устройство		24V 3A
Батерия		20 Ah/24 V
Спирачки		електромагнитни
Максимален безопасен наклон		80 (14 %)
Клирънс		60 mm
Радиус на завиване		1200 mm
Спирачно разстояние		1000 mm

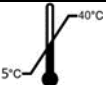Описание на средата, в която ще се използва продуктът	
Температура на съхранение и употреба	 +5°C - +40°C
Влажност за съхранение и използване	30% до 70%

Скоростта и пробегът зависят от теглото на потребителя, типа на терена, нивото на заряд и състоянието на акумулатора.

9. Символи

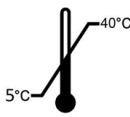 Потвърждение за съответствие със стандартите на ЕС	 Защита от влага	 Производител
 Защита от светлина	 Допустимо тегло на потребителя	 Дата на производство
 Прочетете инструкцията преди употреба	 Използване на закрито и навън	 Предупреждение
 Максимален безопасен наклон.	 Възможност за засядане на пръстите	 Не стойте върху степенките
 Продуктът е предназначен за транспортиране с автомобил	 Температура на съхранение и употреба	 Уникален идентификатор на устройството
 Серийен номер	 Медицинско устройство	 Каталожен номер
		 Код на партида

10. Данни за контакт

Бургос Медикъл ЕООД
гр. Бургас
бул. „Ст. Стамболов“ №73 УМБАЛ-Бургас
тел: 0888 902526 email:kimryanov@burgosmed.com

