И Н С Т Р У К Ц И Я З А У П О Т Р Е Б А

Издание 01.2023



ПРОХОДИЛКА С 4 КОЛАЛА

CARTER VCBP0032

Съдържание:


1. Въведение.....2
2. Описание на продукта.....2
3. Показания .....….....3
4. Противопоказания.....3
5. Употреба.....3
6. Безопасност на употребата.....4
7. Експлоатация и поддръжка.....6
8. Технически параметри.....6
9. Символи….....6
10. Данни за контакт….....7

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИЯТА ПРЕДИ УПОТРЕБА

1. Въведение

Благодарим ви, че избрахте нашия продукт. Дълбоко сме убедени, че той ще отговори на вашите очаквания. Моля, прочетете този документ преди първата употреба. Това ръководство е създадено с цел да предостави необходимата информация за безопасното използване на устройството. Правилното прилагане на препоръките ще допринесе значително за удължаване на трайността и естетиката на продукта. Искаме да подчертаем, че постоянно се опитваме да подобряваме качеството на нашите продукти, което може да доведе до незначителни промени, които не са включени в ръководството.

2. Описание на продукта

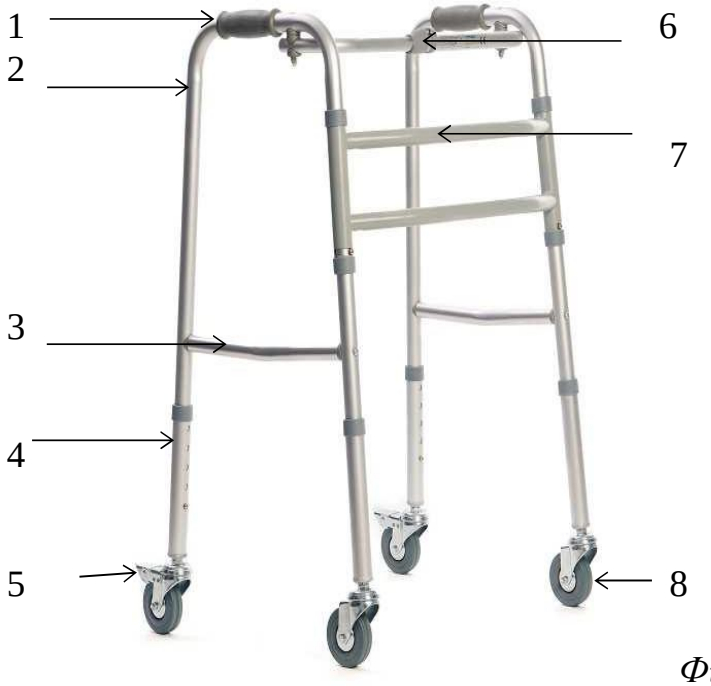

Фиг. 1

№	ОПИСАНИЕ	№	ОПИСАНИЕ
1	Дръжки	5	Спирачки на задните колела
2	Алуминиева рамка	6	Бутон за сгъване
3	Укрепваща рамка	7	Укрепваща рамка
4	Телескопично регулиране на височината	8	Крака, завършени с колела

3. Показания

Помощно средство за ходене, предназначено за хора с увреждания, за хора с двигателни нарушения. Идеален за рехабилитационен процес и физиотерапия (вертикализация, облекчаване на долните крайници).

4. Противопоказания

Противопоказания за изправено положение, наранявания и дисфункции на горните крайници, които не позволяват на пациента да се подпира.

5. Употреба

Продуктът е опакован в сгънато положение. /Фиг. 2/

- След като разопаковате, проверете дали опаковката съдържа всички части в съответствие със списъка на елементите, изложен по-горе.
- Уверете се, че всички компоненти нямат видими повреди. Ако имате някакви съмнения, моля, свържете се с производителя

За да разгънете проходилката, трябва да разтворите страните ѝ максимално навън до момента на закопчаване на блокадата. (Фиг 3.)



Фиг. 2



Фиг. 3

6. Безопасност на употребата



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

а) Преди да използвате проходилката, прегледайте това ръководство и го запазете за бъдещи справки.

б) Използването на изделието върху заледени, мокри, мазни, силно песъчливи повърхности е недопустимо - създава риск от падане.

в) Проходилката трябва да се използва върху равни повърхности с наклон, по-малък от 5%.

г) Преди всяка употреба на този продукт:

- Извършете визуална проверка на всички структурни компоненти на продукта,
- Внимателно проверете стабилността и състоянието на опорната рамка.

д) Не използвайте проходилката в случай на видими или забележими повреди (напр. пукнатини по рамката). Това може да доведе до злополука.

е) Проходилката е предназначена за потребители с максимално тегло 110 kg.

ж) Проходилката е проектирана да поддържа един човек, качването и стоенето върху проходилката е строго забранено.

з) Не оставяйте проходилката в близост до открити източници на огън.

и) Имайте предвид, че температурата на повърхността на тапицерията и частите на рамката може да се повиши след излагане на слънце или друг източник на топлина. Освен това при ниски температури има опасност от преохлаждане на металните части на проходилката. Това може да доведе до изгаряния или измръзване на части от тялото.

й) Недопустимо е да използвате проходилката след откриване на видими или откриваеми повреди (напр. счупена рамка), тъй като това може да доведе до злополука.

к) Всички ремонти трябва да се извършват от квалифициран персонал.

л) Не превишавайте максималната височина.

м) Дръжте проходилката с двете си ръце едновременно, по посока на движението.

н) Уверете се, че блокировка, използвана за сгъване и разгъване на проходилката, работи правилно.

о) Производителят не препоръчва самостоятелно извършване на каквито и да било модификации на проходилката, особено чрез монтиране на допълнителни колела, тъй като продуктът не е оборудван със спирачки. Това може да доведе до падане или сериозни наранявания. Производителят няма да поеме отговорност за такива действия.

п) Съществува риск от заклещване на пръстите в зоната сгъване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Максималното тегло на потребителя е 100 kg

7. Експлоатация и поддръжка

РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА

- Преди да използвате проходилката, тя трябва да се регулира според височината на потребителя чрез телескопичните краката.
- За тази цел натиснете щифта за регулиране на краката и в зависимост от нуждите намалете или удължете височината на краката. (Фиг. 4).



Щифт за регулиране височината на краката

Фиг. 4

- Важно е дължината на всички крака да е една и съща (дръжките трябва да са успоредни на земята).
- Дръжката трябва да е на височина, която да осигурява комфорт и чувство за сигурност на потребителя.

ПРИДВИЖВАНЕ С ПРОХОДИЛКА С КОЛЕЛА

- В процеса на използване на проходилка човек трябва да придвижи проходилката напред и да направи крачка напред, да влезе в рамката.

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

- Почистете рамката на проходилката с влажна кърпа.
- Редовно отстранявайте замърсяванията
- За да се запазят параметрите на проходилката, е много важно всички елементи да се поддържат чисти и да се съхраняват правилно.
- Съхраняването на проходилката на влажни места (бани, перални и др.) или на открито, съчетано с липсата на хигиена, бързо ще влоши експлоатационните и естетическите характеристики.

- Не излагайте проходилката на екстремни метеорологични условия (дъжд, сняг, силно слънце), защото някои части могат да променят цвета си.

Не трябва да използвате:
- разтворители,
- тоалетни препарати,
- остри четки и твърди предмети,
- почистващи препарати, които съдържат хлор,
- агресивни почистващи препарати,
Не почиствайте проходилкат с агрегати под налягане или пара!


ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД
- Прегледът трябва да се извършва редовно, като се предшества от щателно почистване на проходилката (за да се открият всички скрити повреди).

Честота	Обект на контрол	Коментари
Преди първата употреба	Проверка на техническото състояние и всички елементи в рамките на опаковката.	Проверете дали някои елементи имат видими механични повреди.
На всеки две седмици	Контрол на винтове, гайки и нитове относно правилното им закрепване.	Уверете се, че всички винтове и нитовете са фиксирани здраво.
На всеки два месеца	Чистота и общо състояние.	В случай на механична повреда незабавно се свържете с производителя.

РЕМОНТ
В случай на ремонт, моля, свържете се с търговеца.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
Ако имате въпроси или нужда от помощ, свържете се с търговеца.

8. Технически параметри

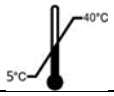Допустимо тегло на потребителя	 110 кг
Дълготрайност на продукта	5 години от датата на закупуване
Височина	815-915 mm
Ширина	550 mm
Тегло	3,7 kg
Обхват на нивата на регулиране	5
Регулиране на височината	през 25 mm
Максимален безопасен наклон	
Материали	Алуминий, полиуретанова пяна, гума
Описание на средата, в която ще се използва продуктът	
Температура на съхранение и употреба	 +5°C - +40°C
Влажност за съхранение и използване	30% до 70%

9. Символи

Потвърждение за съответствие със стандартите на ЕС	Защита от влага	Производител
Защита от светлина	Допустимо тегло на потребителя	Дата на производство
Прочетете инструкцията преди упротеба	Използване на закрито и навън	Предупреждение
Максимален безопасен наклон.	Възможност за засядане на пръстите	Не стойте върху степенките
Продуктът е предназначен за транспортиране с автомобил	Температура на съхранение и употреба	Уникален идентификатор на устройството
SN Сериен номер	MD Медицинско устройство	REF Каталожен номер
Продуктът е предназначен за за транспортиране със самолет		LOT Код на партида

10. Данни за контакт

Бургос Медикъл ЕООД
гр. Бургас
бул. „Ст. Стамболов“ №73 УМБАЛ-Бургас
тел: 0888 902526 email:kimryanov@burgosmed.com