И Н С Т Р У К Ц И Я З А У П О Т Р Е Б А

Издание EJ 06.2022



ИНВАЛИДНА АЛУМИНИЕВА КОЛИЧКА

FLEXI LIGHT VCWK9AFL

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Въведение.....2
2. Описание на продукта.....3
3. Показания .....….....4
4. Противопоказания.....4
5. Употреба.....4
6. Безопасност на употребата…….17
7. Експлоатация и поддръжка….....21
8. Технически параметри……23
9. Символи……24
10. Данни за контакт……24

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИЯТА ПРЕДИ УПОТРЕБА



Винаги спазвайте основните предпазни мерки съгласно информацията, включена по-долу, и относно мерките за безопасност, когато използвате устройството. Прочетете внимателно цялата инструкция преди употреба. Съхранявайте това ръководство за употреба за бъдещи справки.



Рехабилитационната количка FLEXI LIGHT се предлага в четири размера, За подробна информация, моля, вижте раздела "Технически параметри".

1. Въведение


Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт. Убедени сме, че той ще оправдае Вашите очаквания. Моля, прочетете внимателно настоящата инструкция за употреба, преди да използвате продукта за първи път. Тя съдържа важна информация за неговата безопасна и правилна експлоатация. Спазването на посочените указания и препоръки ще допринесе за удължаване на експлоатационния срок на продукта и за запазване на неговия естетичен вид. Моля, уверете се, че приложеният гаранционен формуляр е попълнен и предоставен на дистрибутора. Това ще ни позволи да Ви осигурим бързо и качествено гаранционно и след гаранционно обслужване.

Ако устройството се използва от друго лице, на него трябва да бъде предоставено копие от настоящите инструкции за употреба.

Настоящите инструкции за употреба отразяват конструкцията и техническите характеристики на продукта към момента на тяхното публикуване. Поради последващи промени в конструкцията е възможно някои илюстрации и снимки в настоящото ръководство да не съответстват напълно на закупения продукт. Производителят си запазва правото да прави промени в конструкцията на продукта без предварително уведомление.

Производителят не носи отговорност за телесни повреди, материални щети или имуществени вреди, настъпили вследствие на неправилна, нецелесъобразна или опасна употреба на продукта.

2. Описание на продукт

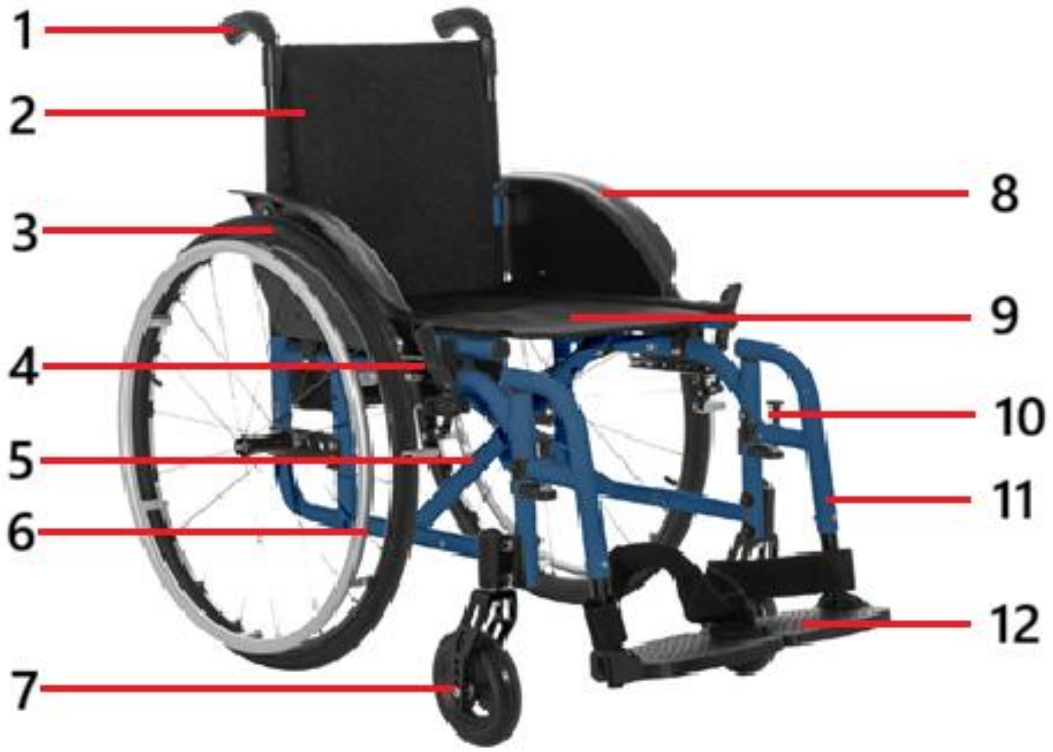

Фиг.1

ОПИСАНИЕ	
1	Ергономична дръжка
2	Облегалка
3	Задно колело с пневматична гума
4	Ръчна спирачка
5	Рамка с напречно сгъване
6	Ръчни обръчи за задните колела
7	Предно колело
8	Странична преграда
9	Седалка
10	Заключващ лост на степенка
11	Рамка на степенка
12	Платформа на степенка
Допълнителни аксесоари: Регулируема височина на седалката, възглавница, колела против преобръщане, подлакътници.	

3. Показания

Инвалидната количка е предназначена за индивидуално придвижване на хора с увреждания, причинени от увреждане на гръбначния мозък, церебрална парализа, увреждания на долните крайници, невромускулни заболявания, черепно-мозъчни травми, както и на възрастни хора с ограничена подвижност.



Максималнодопустимото тегло на ползвателя е 114 kg.

4. Противопоказания



- състояния, при които седенето е противопоказано;
- състояния, изискващи стабилизиране на главата и шийния отдел на гръбначния стълб;
- лица с психични разстройства не трябва да бъдат оставяни в инвалидната количка без надзор.


5. Употреба

След отваряне на опаковката проверете дали тя съдържа всички елементи, посочени на фигура 1. Уверете се, че нито един от тях не е с видими механични повреди. При липса на елемент или съмнение за повреда се свържете с дистрибутора.

Не използвайте инвалидната количка, преди всички нейни компоненти да бъдат правилно сглобени.

РАЗГЪВАНЕ НА ИНВАЛИДНАТА КОЛИЧКА

- Поставете инвалидната количка така, че задните колела да са обърнати към вас.
- Разтворете дръжките (фигура 2).
- Поставете инвалидната количка така, че предните колела да са обърнати към вас.
- Натиснете рамката на седалката, докато инвалидната количка се разгъне напълно.

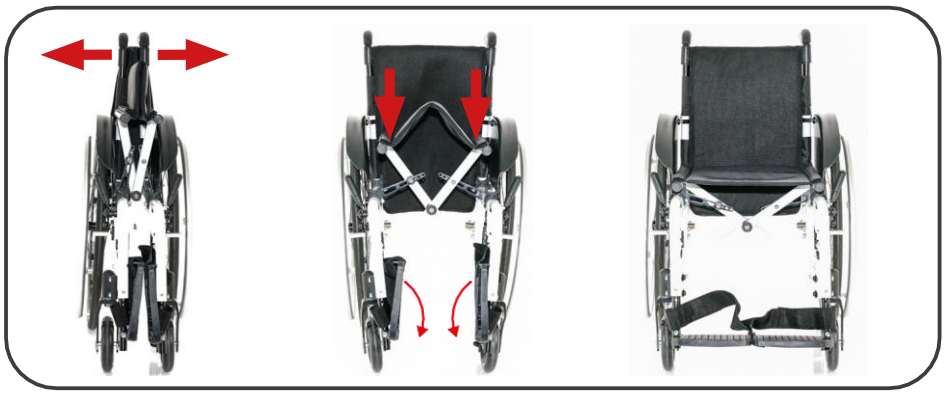

Фиг. 2

МОНТАЖ НА СТЕПЕНКИТЕ

За да монтирате степенките, поставете скобите им върху държачите (фигура 3), след което ги завъртете навътре до крайно положение, докато заключващият механизъм щракне и ги фиксира на място (фигура 4).



Фиг. 3




Фиг. 4

- Уверете се, че степенките са фиксирани. *Фигура 5*
- След това разгънете платформите на подножките. *Фигура 6*




Фиг. 5

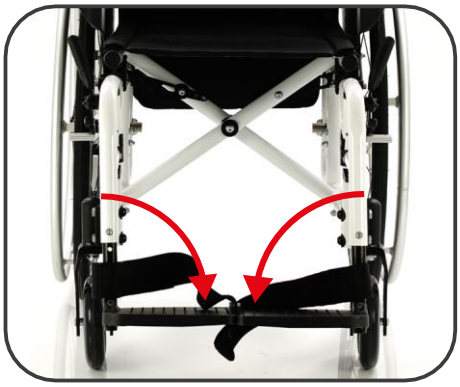


Фиг. 6

СПИРАЧКА

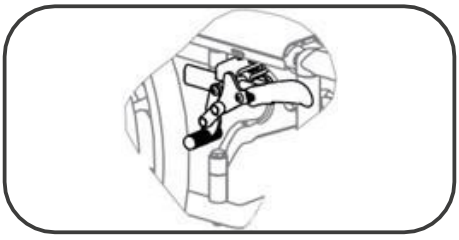

Фиг 7. Спирачен лост.

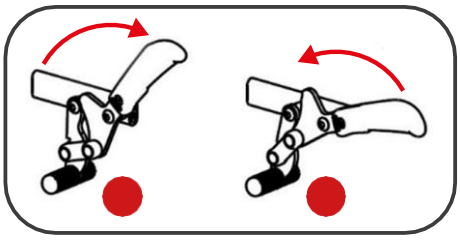

Фиг 8. задействане на спирачката


За да задействате спирачката, преместете спирачния лост докрай напред, докато спирачният механизъм се притисне плътно към задното колело. За да освободите спирачката, издърпайте спирачния лост назад. Уверете се, че спирачката е надеждно фиксирана и не се освобождава при опит за придвижване на инвалидната количка.

ОБЛЕГАЛКА

Облегалката може да се регулира според индивидуалните нужди на потребителя.

- Свалете възглавницата на облегалката (A).
- Разкопчайте закрепващите ленти в задната част на облегалката.
- Регулирайте напрежението (B), като затегнете или разхлабите лентите според необходимостта.
- Закрепете лентите отново и поставете възглавницата на облегалката.

Фиг. 9

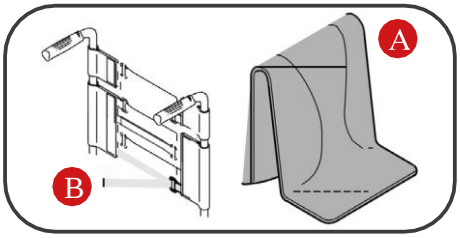


ВНИМАНИЕ!

Ако ремъците на облегалката са прекалено хлабави, точката на преобръщане на инвалидната количка може да се промени, което представлява опасност. Уверете се, че ремъците са правилно регулирани.

РЕГУЛИРАНЕ НА ПОДЛАКЪНИКА

Регулирането на височината на подлъкътника трябва да се извършва единствено от оторизиран дистрибутор или от сервизния отдел на производителя.

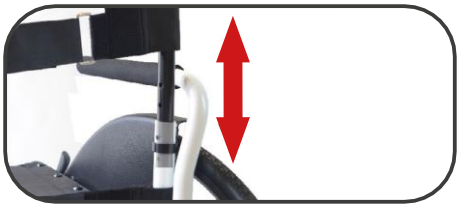


Фиг. 10


ЗАДНИ КОЛЕЛА

- Монтиране и демонтиране на задните колела

Инвалидната количка е оборудвана със система за бързо освобождаване на задните колела, която позволява лесното им монтиране и демонтиране.
За да демонтирате задно колело, натиснете бутона на механизма за бързо освобождаване (Фигура11) и издърпайте колелото навън.
За да монтирате колелото, натиснете бутона на механизма за бързо освобождаване, поставете оста на колелото в отвора и освободете бутона. Уверете се, че колелото е фиксирано надеждно, като леко го издърпате навън.

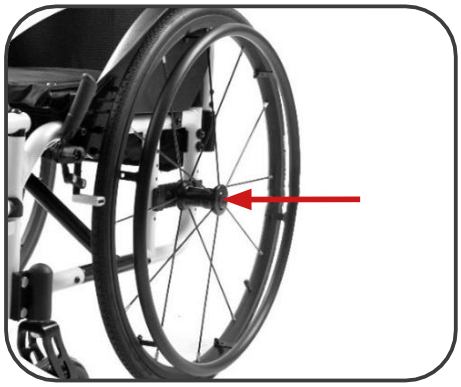

Фиг. 11

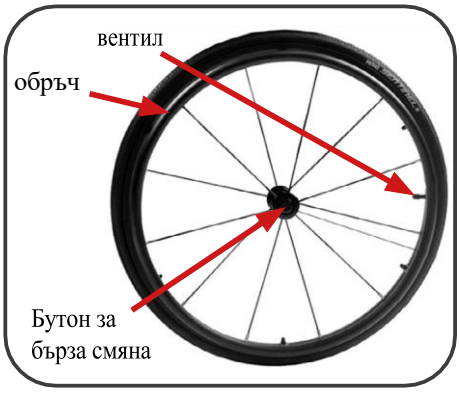

Фиг.12

- Напомпване на гумите

За инвалидни колички с надуваеми гуми.



Фиг. 13 Вентил **Schrader**



Фиг. 14 Вентил **Woods (Dunlop)**

- Преди да напомпате гумите, определете типа на вентила. В зависимост от модела на инвалидната количка той може да бъде **Schrader** (автомобилен) или **Woods (Dunlop)** (велосипеден), както е показано на илюстрации 13 и 14.
- Използвайте помпа, съвместима с типа вентил, монтиран на инвалидната количка.
- Повечето съвременни ръчни и крачни помпи са предназначени за работа както с автомобилни (Schrader), така и с велосипедни (Woods/Dunlop) вентили. При необходимост използвайте подходящ преходник.
- Напомпайте гумите до препоръчаното от производителя налягане, посочено върху страницата на гумата.
- След напомпване проверете дали капачката на вентила е поставена и дали няма изтичане на въздух.
- Развийте и свалете пластмасовата капачка на вентила и я поставете на сигурно място. Не я губете, тъй като липсата ѝ може да доведе до замърсяване на вентила, затруднено напомпване на гумата и по-бърза загуба на налягане.
- Поставете накрайника на помпата върху вентила и се уверете, че е правилно фиксиран. При необходимост притиснете накрайника плътно към вентила, за да предотвратите изтичане на въздух.
- Ако помпата е оборудвана със заключващ лост или скоба на накрайника, затегнете я. При накрайници и вентили с резбово съединение завийте накрайника към вентила. Това осигурява надеждна връзка и предотвратява отделянето на накрайника по време на напомпване.
- Развийте и свалете пластмасовата капачка на вентила и я поставете на сигурно място. Не я губете, тъй като липсата ѝ може да доведе до замърсяване на вентила, затруднено напомпване на гумата и по-бърза загуба на налягане.
- Поставете накрайника на помпата върху вентила и се уверете, че е правилно фиксиран. При необходимост притиснете накрайника плътно към вентила, за да предотвратите изтичане на въздух.
- Ако помпата е оборудвана със заключващ лост или скоба на накрайника, затегнете я. При накрайници и вентили с резбово съединение завийте накрайника към вентила. Това осигурява надеждна връзка и предотвратява отделянето на накрайника по време на напомпване.

➢ Налягане в гумите и спирачна сила

Регулирайте налягането в задните гуми в зависимост от теглото на ползвателя. След настройване на налягането проверете правилното функциониране на спирачките. При активирани спирачки инвалидната количка, натоварена с теглото на ползвателя и поставена с предната част по посока на наклона, не трябва да се плъзга по наклон с 15% (приблизително 9°).

След извършване на всички настройки внимателно проверете всички крепежни елементи и връзки, за да се уверите, че са надеждно фиксирани и безопасни за употреба.


ВНИМАНИЕ!
Напомпайте гумите до правилното налягане, посочено от производителя върху страничните стени на гумата.
Използвайте помпи с манометър или ръчна велосипедна помпа.

РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА СЕДАЛКАТА


ВНИМАНИЕ!
Височината на седалката трябва да се регулира от оторизиран дистрибутор или сервизен център на производителя.



Фиг. 15

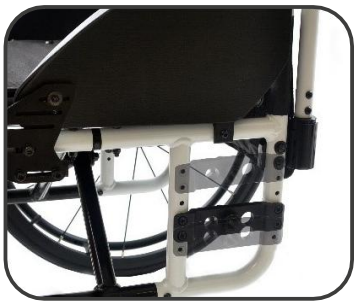

Фиг. 16

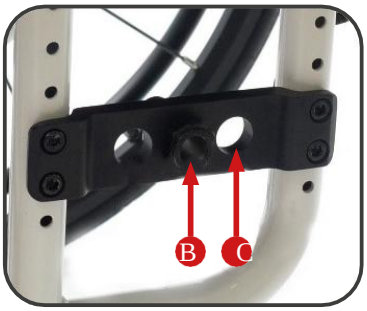

Фиг. 17

- Предното колело разполага с 5-степенна регулировка на височината. В най-ниската си позиция – препоръчва се да се използва колело с по-голям диаметър.
- Задното колело разполага с 5-степенна регулировка на височината.
- Задното колело може да се регулира и в хоризонтална равнина напред и назад, както е показано на илюстрация 16.


РЕГУЛИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА СЕДАЛКАТА – ПО ИЗБОР



Фиг. 18

РЕГУЛИРАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА СТЕПЕНКИТЕ

- Дължината на степенките е регулируема.
- За да настроите желаната дължина на степенките, демонтирайте степенките.
- В долната част на степенките се намира регулиращ винт.
- Използвайте 5-милиметров шестограмен ключ и 10-милиметров гаечен ключ, за да разхлабите регулиращия винт на степенките (Фигура19).
- При необходимост плъзнете платформата на степенките, вградена в рамката ѝ, навън или навътре (степенно регулиране – монтажни отвори).
- След като изберете правилната дължина на степенките, затегнете винта за регулиране.

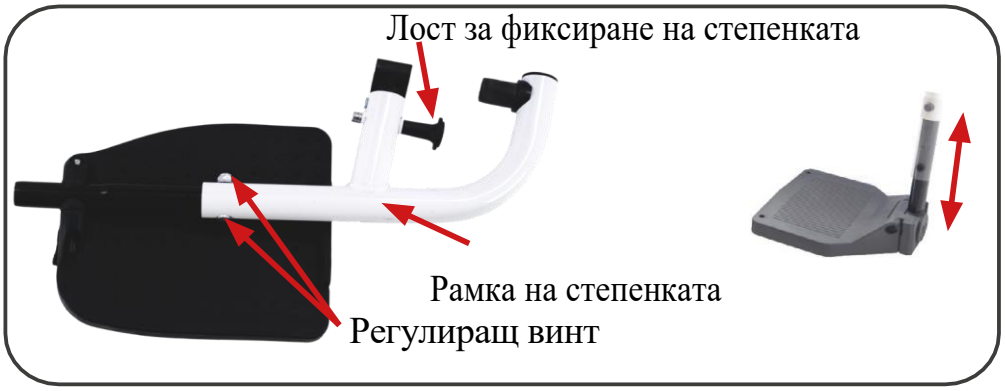

Фиг. 19

РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОБЛЕГАЛКАТА И ДРЪЖКИТЕ

Височината на облегалката и дръжките за бутане може да се регулира.
Регулирането трябва да се извърши от оторизиран дистрибутор или сервизен център на производителя.

ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че редовно проверявате връзките между компонентите на инвалидната количка и се свържете с дистрибутора, ако имате въпроси.

КАЧВАНЕ И СЛИЗАНЕ ОТ ИНВАЛИДНАТА КОЛИЧКА

- Поставете инвалидната количка възможно най-близо до мястото, към което искате да се придвижите.
- Задействайте паркинг спирачките.

- Премахнете подлакътниците или ги издърпайте нагоре.
- Отделете подножките или ги раздалечете.
- Поставете краката си на земята.
- Дръжте се за инвалидната количка и, ако е необходимо, за близък предмет.
- Бавно се преместете към или от инвалидната количка.



Фиг. 20

ВНИМАНИЕ!

Риск от преобръщане.
При качване или слизане от инвалидната количка съществува висок риск от преобръщане. Качвайте се или слизайте от инвалидната количка само когато сте физически способни да го направите. При качване или слизане седнете възможно най-назад в седалката. Това ще предотврати повреда на тапицерията и ще попречи на инвалидната количка да се преобърне напред.

Ако спирачките са освободени или повредени, инвалидната количка може да се придвижи надолу по наклон по неконтролиран начин – не се опирайте на спирачките, когато се качвате или слизате от инвалидната количка.

Страничните предпазители и подлакътниците могат да се повредят – никога не сядайте върху страничните предпазители или подлакътниците, когато се качвате или слизате от инвалидната количка.

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ИНВАЛИДНАТА КОЛИЧКА

- Преди да потеглите с инвалидната количка, винаги се уверявайте, че никоя част от тялото или дрехите на пациента не може да се заклещи в движещите се части на количката.
- Ако пациентът не може да се задържи в седнало положение самостоятелно, инвалидната количка трябва да бъде допълнително оборудвана със

стабилизиращи колани (които предотвратяват изплъзването на пациента от седалката).

- Управлявайте инвалидната количка с двете ръце.
- Инвалидната количка се управлява и направлява от ползвателя чрез ръчните джанти. Преди да потеглите без помощник, определете критичната точка на преобръщане на инвалидната количка.



Фиг. 21



ВНИМАНИЕ!

Риск от преобръщане.

Инвалидната количка може да се преобърне назад, ако не е снабдена със защита срещу преобръщане (колела против преобръщане). За да предотвратите преобръщането на инвалидната количка, монтирайте защита срещу преобръщане (колела против преобръщане).



Инвалидната количка може да се преобърне напред – при настройването ѝ проверете как се държи, когато е наклонена напред, и адаптирайте стила си на управление съответно.



Тежък товар, окачен на облегалката, може да промени центъра на тежестта на инвалидната количка – бъдете предпазливи при управлението ѝ.

ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ПРАГОВЕ ИЛИ БОРДЮРИ

<u>Напред без помощ от придружител</u>:

- Опитен ползвател на инвалидна количка може да преминава през прагове или бордюри без помощ.
- Можете да слезете от нисък бордюр, като се придвижите напред. Уверете се, че платформите за краката не докосват земята.
- Поддържайте равновесие върху задните колела, за да намалите натиска върху предните колела.
- След това преминавайте през бордюра.

Движение назад без помощ от придружител:


- Опитен ползвател на инвалидна количка може да преодолява прагове или бордюри без помощ.
- Завъртете инвалидната количка така, че и двете задни колела да са обърнати към бордюра.
- Наведете се напред, за да преместите центъра на тежестта напред.
- Приближете инвалидната количка до ръба на бордюра.
- След това, като използвате ръчните джанти, спускайте инвалидната количка от бордюра по контролиран начин.



Фиг. 22

Придвижване напред с помощта на придружител:

- По-високите бордюри могат да се преодоляват с помощ.
- Придружителят трябва леко да наклони инвалидната количка назад.
- Преодолейте бордюра, като се движите на задните колела.
- След това инвалидната количка трябва да се опре на всичките четири колела.

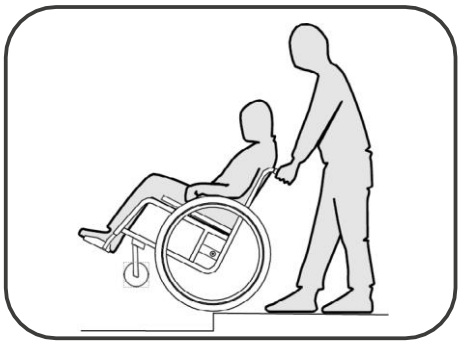

Фиг. 23

Придвижване по склонове



ВНИМАНИЕ!

Риск от загуба на контрол върху инвалидната количка. При движение по наклони или склонове инвалидната количка може да се преобърне назад, напред или настрани.


- За да предотвратите преобръщане при изкачване на наклон, наведете се леко

напред, за да преместите центъра на тежестта напред.

- При преминаване по дълги наклони придружителят трябва винаги да върви зад инвалидната количка.
- Избягвайте странични наклони.
- Избягвайте наклони с ъгъл над 70°.
- Избягвайте резки движения при промяна на посоката по наклон.
- Ако инвалидната количка стои на наклон, използвайте паркинг спирачките.

Спускане по наклон:

- Когато се спускате по наклон, се уверете, че контролирате посоката и скоростта си.
- Наклонете се назад и забавете въртенето на ръчните джанти с ръце.
- Трябва да можете да спрете инвалидната количка по всяко време, като хванете ръчните джанти.

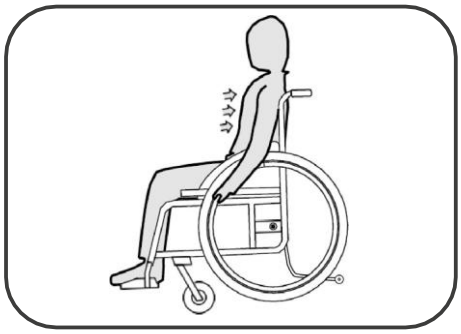


Фиг. 24

ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ПРАГОВЕ ИЛИ БОРДЮРИ

Самостоятелно, без помощ от придружител:

- Опитен ползвател на инвалидна количка може да преминава през прагове или бордюри без помощ.
- Приближете предните колела до ръба на прага или бордюра.
- Уверете се, че степенките не докосват прага или бордюра.
- Сега можете да прекарате предните колела по бордюра.
- След това прекарайте задните колела по бордюра.

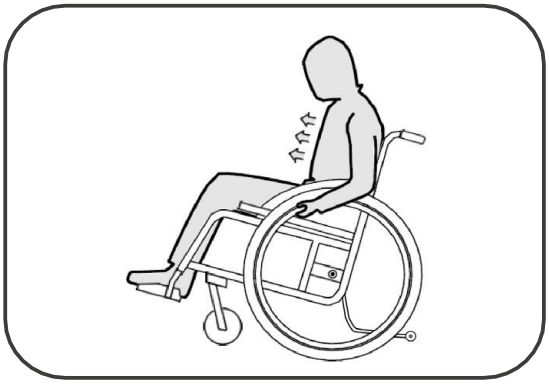

Фиг. 25

Придвижване напред с помощта на придружител:

- Уверете се, че степенките не докосват бордюра.
- Придружителят трябва да наклони инвалидната количка назад, докато предните колела се повдигнат над бордюра.
- Лицето, седящо в инвалидната количка, трябва да се наведе назад, за да премести центъра на тежестта върху задните колела.
- Преместете предните колела върху бордюра, а след това и задните колела.
- По-високите бордюри могат да се преминават чрез движение назад с помощта на придружител.
- Завъртете инвалидната количка така, че задните колела да са обърнати към бордюра.
- Лицето, седящо в инвалидната количка, трябва да се наведе назад, за да премести центъра на тежестта върху задните колела.
- Придружителят трябва да издърпа инвалидната количка върху бордюра.
- Лицето, седящо в инвалидната количка, трябва да се върне в стандартната позиция в инвалидната количка.



Фиг. 26




ВНИМАНИЕ!

Риск от преобръщане.

При изкачване или спускане по стълби може да загубите равновесие, което да доведе до преобръщане на инвалидната количка – когато изкачвате или спускате стълби с повече от едно стъпало, винаги ползвайте помощта на двама придружители.

Придвижване напред или назад, нагоре или надолу по стълбите:

Можете да се придвижвате нагоре или надолу по стълбите стъпка по стъпка, както е показано на фигура 27. Първият помощник трябва да застане зад инвалидната количка, като държи дръжките за бутане. Вторият помощник трябва да държи твърдата част на предната рамка, за да стабилизира инвалидната количка отпред.

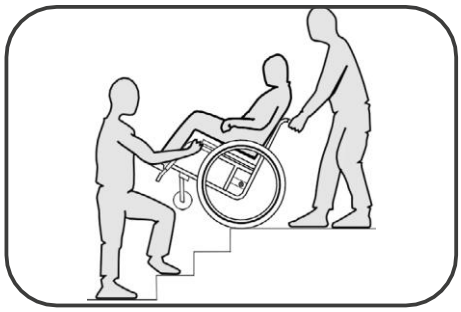


Фиг. 27

Стабилност и равновесие в седнало положение

Навеждане напред.

Някои ежедневни дейности и действия изискват да се навеждате напред, назад или настрани, докато седите в инвалидната количка. Това оказва голямо влияние върху стабилността на инвалидната количка. За да поддържате равновесие по всяко време, следвайте инструкциите, показани на Фигура 28.

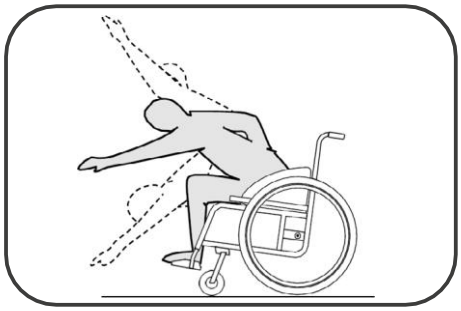

Фиг. 28




ВНИМАНИЕ!

Риск от падане.

Ако се наведете напред, може да паднете от инвалидната количка. Никога не се навеждайте прекалено напред и не се придвижвайте към предната част на седалката, за да достигнете някакви предмети. Когато вдигате предмети от пода, не се навеждайте напред между коленете си.

Накланяне назад.

- Завъртете предните колела напред. (За да направите това, преместете инвалидната количка леко напред и след това назад).
- Не задействайте паркинг спирачката.
- Когато се протягате назад, не се протягайте толкова далеч, че да се наложи да промените позицията си на седене.

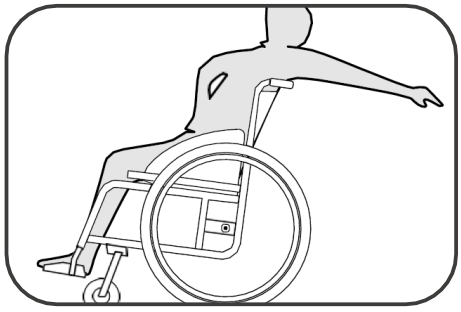

Фиг.29

ВНИМАНИЕ!
Риск от падане.
Ако се наведете прекалено назад, инвалидната количка може да се преобърне. Не се навеждайте през облегалката. Използвайте предпазно устройство срещу преобръщане.

ПРЕВОЗ НА ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА С АВТОМОБИЛ

- За да сгънете инвалидната количка за превоз, махнете възглавницата на седалката.
- След това приберете степенките една към друга и ги махнете.
- След това издърпайте нагоре рамките на седалката (Фигура 30), за да сгънете инвалидната количка.
- Демонтирайте колелата, като използвате само механизма за бързо освобождаване на задните колела.
- За да монтирате или демонтирате задните колела, натиснете механизма за бързо освобождаване на колесната ос (Фигура 11) и издърпайте колелото навън или го вкарайте обратно.



Фиг. 30

ВНИМАНИЕ!
Когато премествате инвалидната количка, я хващайте само за части от рамката. Никога не я хващайте за подлакътниците или подножките.

6. Безопасност на употребата

ВНИМАНИЕ!
Всеки „сериозен инцидент“, възникнал във връзка с устройството, трябва да бъде докладван на производителя и на компетентния орган на държавата-членка, в която живее потребителят.



Продуктът е предназначен за хора с увреждания, страдащи от двигателни нарушения. Ако не сте сигурни дали здравословното ви състояние ви позволява да използвате продукта, консултирайте се с медицински специалист.



Не променяйте продукта по никакъв начин; това ще доведе до анулиране на гаранцията.

Превишаването на максималното тегло на потребителя води до анулиране на гаранцията. Производителят не носи отговорност за наранявания и щети, ако бъде превишено максималното тегло на потребителя.



Преди да започнете да използвате инвалидната количка, прочетете настоящите инструкции за употреба и ги запазете за бъдеща справка.

a) Задействайте спирачките, когато се качвате и слизате от инвалидната количка!
b) Преди да се качите или слезете от инвалидната количка, не стъпвайте върху степенките – първо ги сгънете напълно или ги раздалечете.
c) Никога не премествайте инвалидната количка заедно с ползвателя.
d) Ако инвалидната количка се премества през врати и други проходи, уверете се, че има достатъчно пространство от двете страни, за да се избегнат наранявания на ръцете или повреда на инвалидната количка.
e) При движение по обществени пътища спазвайте правилата за движение по пътищата.
f) Както при другите превозни средства, не управлявайте инвалидната количка под въздействието на алкохол, други лекарства или наркотични вещества. Това важи и за движението в закрити помещения.
g) Инвалидната количка не е предназначена за превозване на пациента по стълби нагоре или надолу, за използване като носилка или като средство за издърпване на пациента нагоре. Конструкцията на инвалидната количка и свързващите елементи не са подходящи за такива претоварвания, ако количката се използва по този начин. Това може да отслаби или повреди цялата конструкция на инвалидната количка и да доведе до инцидент!
h) Инвалидната количка е предназначена за използване на закрито и на открито, само върху павирани, равни повърхности. Използването на продукта върху повърхност, която не осигурява стабилна опора за ползвателя, т.е. върху заледени, мокри или мазни повърхности или повърхности с голямо количество пясък, не е разрешено поради риск от падане.
i) Инвалидната количка може да се използва само върху повърхности, където и четирите колела или предните колела на удължителя са в контакт със земята, или контактът е достатъчен, за да осигури адекватно сцепление на колелата.
j) Трудни архитектурни препятствия (стръмни или дълги наклони, високи стъпала

и др.) могат да се преодоляват само с помощта на придружител.

k) Ако ползвателят няма достатъчен опит в използването на инвалидната количка, помолете лицето, което се грижи за него, за помощ при преодоляване на препятствия.
l) Не оставяйте инвалидната количка с ползвателя в непосредствена близост до източник на открит огън.
m) Имайте предвид, че температурата на тапицерията и частите на рамката може да се повиши при излагане на слънце или друг източник на топлина, а при ниски температури съществува риск металните части на инвалидната количка да станат много студени. Това може да доведе до изгаряния или измръзване.
n) Когато пренасяте инвалидната количка, я дръжте за конструкцията на рамката. Никога не пренасяйте инвалидната количка, хващайки я за подлакътниците или степенките.
o) Не използвайте инвалидната количка като седалка в моторно превозно средство
p) Инвалидната количка трябва винаги да се сгъва и разгъва лесно. В случай на проблеми със сгъването на инвалидната количка, прочетете отново инструкциите или се свържете с дистрибутора.
q) Бъдете особено внимателни при придвижване по наклонени повърхности. Максималният допустим наклон надолу и нагоре е 5%.
r) Спирачките не се използват за забавяне на инвалидната количка по време на движение, а само за да се предотврати случайно придвижване на количката.
s) И двете спирачки трябва да бъдат правилно регулирани. Ако една от спирачките е неправилно настроена, това може да доведе до блокиране на едно от задните колела, което на стръмни наклони може да предизвика завъртане на инвалидната количка около блокираното колело, което може да бъде трудно за контролиране.
t) Редовно проверявайте налягането в гумите. Когато налягането в гумите е по-ниско от препоръчаното, спирачната сила може да бъде значително намалена!
u) Когато вдигате предмети от пода, никога не се протягайте назад, за да не се преобърне инвалидната количка назад.
v) Когато се протягате напред, не се навеждайте прекалено далеч от инвалидната количка, тъй като това може да доведе до падане.
w) Не се протягайте към предмети на пода пред вас, ако това изисква да се плъзнете извън инвалидната количка.
x) Винаги задействайте спирачките на колелата, когато пациентът се качва или слиза от инвалидната количка, когато коригира положението си или когато инвалидната количка е паркирана.
y) Не оставяйте пациента в инвалидната количка (дори когато спирачките са задействани) на наклони, рампи, мецанини и др.
z) След монтирането на колелото винаги проверявайте дали заключващият механизъм на колесната ос е задействан – при монтирането на колелата трябва да се чуе отчетливо щракване на заключващия механизъм – и силно разклатете

колелото, без да натискате.

aa) Използването на спирачките по време на шофиране може да доведе до инцидент с всички произтичащи от това последствия.

bb) След всяка настройка проверявайте правилното функциониране на спирачката.

cc) Ако гумите на колелата са замърсени с масло, грес, вода или други вещества, спирачната сила може да бъде намалена.

dd) След продължителна употреба на инвалидната количка спирачното усилие може да се намали поради луфт между спирачния щифт и гумата на колелото. Спирачките могат да се регулират от потребителя. За да направите това, разхлабете винтовете, фиксиращи положението на спирачния механизъм, преместете целия механизъм към колелото, докато достигнете положение, при което колелото не се върти след повторно задействане на спирачката (проверете дали регулирането е правилно, докато пациентът седи в инвалидната количка). След приключване на регулирането, фиксирайте положението на механизма с фиксиращи болтове. Ако имате въпроси относно регулирането, моля, свържете се с вашия дистрибутор.

ee) За да се поддържат експлоатационните характеристики на инвалидната количка, е от решаващо значение всичките ѝ компоненти да се поддържат чисти и продуктът да се съхранява правилно. Съхранението на инвалидната количка в помещения с много висока влажност (бани, перални помещения и др.) или на открито, съчетано с липса на хигиена, ще доведе до бързо влошаване на нейните експлоатационни характеристики и външния ѝ вид.

ff) Не използвайте инвалидната количка, ако забележите видими или установими неизправности или ако степента на износване на частите ѝ сочи потенциален риск от инцидент (например износване на колелата, напукана тапицерия и др.). Всички ремонти трябва да се извършват от квалифициран персонал, а през гаранционния период – единствено от сервизния център на производителя.

gg) При инвалидни колички с напомпани гуми не превишавайте максималното налягане в гумите, посочено върху самата гума.

hh) Когато превозвате инвалидната количка (например в багажника), не я натоварвайте с нищо, тъй като това може да повлияе на конструкцията ѝ.

ii) Дръжте инвалидната количка извън достъпа на деца на възраст под пет години.

jj) Бъдете особено внимателни при сгъването на инвалидната количка, за да избегнете заклещване на пръстите ви в сгъващите се части:

- при монтиране и демонтиране на подножката,
- при разгъване на подвижните части на инвалидната количка,
- в зоната на спирачките.



ВНИМАНИЕ!

Максималното тегло на потребителя е 114 кг. потребител.

7. Експлоатация и поддръжка

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

Проверката трябва да се извършва редовно и да бъде предшествана от цялостно почистване на количката (за да се открият всички скрити повреди) по време на техническата проверка:

Честота	Предмет на проверката	Коментари
Преди първата употреба	Проверка на техническото състояние на всички компоненти на продукта.	Проверете дали някой от елементите има видими механични повреди.
Преди всяка употреба	Проверка на колелата и спирачките.	Спирачките и гумите могат да се износят, проверявайте състоянието им преди всяка употреба.
На всеки две седмици	Закрепване на болтове и гайки и гарантиране на тяхната изправност.	Уверете се, че всички болтове и гайки са добре затегнати.
Веднъж месечно	Оси на колелата	Осите на колелата трябва да се поддържат, като се впръсква смазка между оста и главината.
Веднъж месечно	Състояние на съединенията за бързо свързване, резби и заварки.	Търсете пукнатини в материала на рамката.
Веднъж месечно	Състояние на гумите	Уверете се, че протекторът на гумата не е износен и че гумите нямат видими повреди.
На всеки два месеца	Чистота, общо състояние.	В случай, че възникват механични повреди трябва незабавно да се свържете с търговеца/сервиза.

РЕМОНТ

Ако е необходим ремонт, свържете се с търговеца.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Ако имате въпроси или нужда от помощ, свържете се с търговеца.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Ако продуктът се използва от много хора (например в дом за възрастни хора), използвайте търговски дезинфектанти. Преди да дезинфекцирате инвалидната количка, почистете външната ѝ повърхност. Използвайте само дезинфектанти, които са тествани и одобрени от РЦЗ.

ВНИМАНИЕ!

Дезинфекционните средства могат да повредят външната повърхност, което

да намали дългосрочната функционалност на компонентите. Винаги спазвайте указанията за употреба на продуктите, посочени от производителя.

ЖИВОТЕН ЦИКЪЛ НА ПРОДУКТА

Очакваният срок на експлоатация на медицинското изделие е 4 години, ако се използва по предназначение и ако всички дейности по поддръжка и ремонт се извършват съгласно изискванията. Жизненият цикъл на медицинското изделие зависи също така от честотата на употреба, работната среда и грижата за изделието. Жизненият цикъл на изделието може да бъде удължен чрез използване на резервни части. Резервните части обикновено са налични в продължение на 5 години след изтеглянето на модела от производство. Очакваният жизнен цикъл на медицинското изделие не е равнозначен на допълнителна гаранция.


ПОВТОРНА УПОТРЕБА (ПРОДУКТ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА)

Продуктът е подходящ за повторна употреба. Броят пъти, през които може да бъде използван повторно, зависи от честотата и начина на употреба на продукта. Преди повторна употреба продукта трябва да бъде старателно почистен и дезинфекциран, като се проверят неговите характеристики за безопасност. При необходимост се извършват ремонтни дейности.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Продуктът трябва да се изхвърли в съответствие с действащите местни и национални разпоредби. За правилното изхвърляне на опаковката, металните компоненти, пластмасовите компоненти, неопрена, силикона и полиуретановите материали се свържете с местната фирма за извозване на отпадъци или с оторизиран дистрибутор.

8. Технически параметри

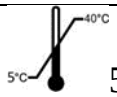РАЗМЕРИ		15``	16``	17``	18``
Допустимо тегло на потребителя 		114 kg			
Височина на количката		810 -970 mm			
Ширина на количката		555 mm	580 mm	605 mm	630 mm
Ширина на количката сгъната		300 mm			
Дължина на количката		930 mm			
Ширина на седалката		380 mm	400 mm	430 mm	460 mm
Дълбочина на седалката		420 mm			
Височина на облегалката		360 mm			
Тегло на количката с всички компоненти		12,48 kg	14,98 kg	15,48 kg	15,98 kg
Тегло на количката		11,83 kg	12,33 kg	12,83 kg	13,33 kg
Материали		Рамка: Алуминий Тапицерия: PVC			
Размер на гумите	предните	Бандажно 150 mm (6”)			
	задните	Пневматично 609 mm (24”)			
Максимален наклон		 5 %			
Радиус на завиване		105°			
Описание на средата, в която ще сеизползва продуктът					
Температура на съхранение и употреба		 5 – 40°C			
Влажност за съхранение и използване		30% до 70%			
Условия за пране на тапицерия					
Сериен номер		SN върху опаковката			

9. Символи

Потвърждение за съответствие със стандартите на ЕС	Защита от влага	Производител
Защита от светлина	Допустимо тегло на потребителя	Дата на производство
Прочетете инструкцията преди упротеба	Използване на закрито и навън	Предупреждение
Максимален безопасен наклон.	Възможност за засядане на пръстите	Не стойте върху степенките
Продуктът е предназначен за транспортиране с автомобил	Температура на съхранение и употреба	Уникален идентификатор на устройството
Сериен номер	Медицинско устройство	Каталожен номер



Продуктът не е предназначен за използване като седалка затранспортиране в моторно превозно средство.

10. Данни за контакт

Бургос Медикъл
ЕООДгр. Бургас
бул. „Ст. Стамболов“ №73 УМБАЛ-Бургас
тел: 0888 902526 email:kimryanov@burgosmed.com